


取扱説明書

要 保 存

保証書付

(販売名)
ソーラチ パーティカル

SOLARCH VERTICAL
ファイテン ソラーチ パーティカル

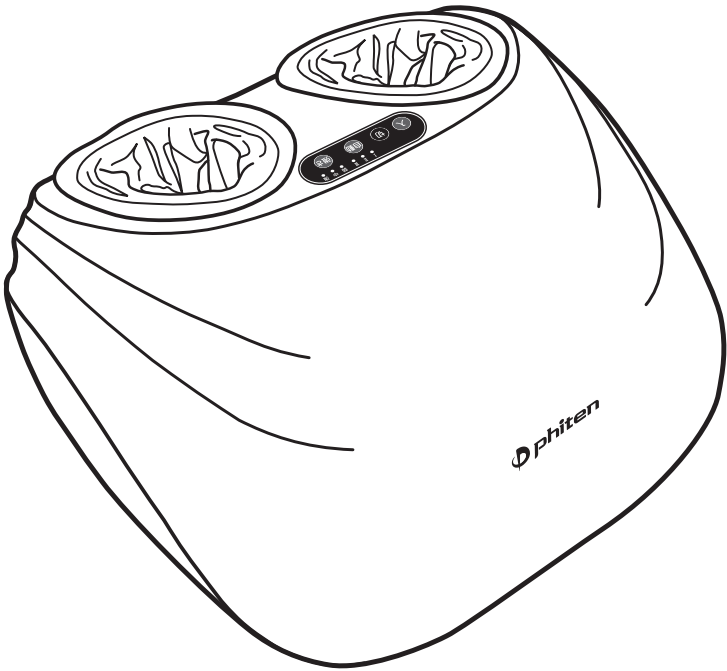

メタックスは
ファイテン社開発の
水溶化メタル技術の
ブランドです。

◎もくじ

●安全に使用していただくために P1, 2, 3, 4, 5, 6

●各部の名称 P7

●操作のしかた P8

●ご使用方法 P9

●オーバーカバーの取り付け方と外し方 P10

●お手入れ・保管方法 P11

●愛情点検について P11

●補修用性能部品の保有期間 P11

●廃棄について P11

●アフターサービスをお申し付けの前に P12

●使用目的または効果 P12

●動作原理 P12

●アフターサービスについて P13

●仕様 P13

●お客様相談室のご案内 P14

●保証書 裏表紙

家庭用電気マッサージ器（機種名 0420BE755000）

- * お買い上げありがとうございます。
 - * 本書は、ご使用前に必ずお読みください。
 - * 使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。
 - * 本機近くの見やすく、いつも同じ場所に保管してください。
 - * ご使用前に、付属品を確認してください。
- 取扱説明書（本書） 1冊
- オーバーカバー（本機取り付け済） 1組 2枚

安全に使用していただくために

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を守らず、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、下記の表示(絵表示と用語)で区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の例です)



禁止

⊘記号は、禁止(してはいけないこと)を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は“一般的な禁止”)が書かれています。



強制

⓪記号は、行為を強制(必ずすること)を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は“一般的な強制”)が書かれています。



警告

安全に使用していただくために



禁止

■次の人は使用しないでください。

- ・医師からマッサージを禁じられている人

例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

- ・足に疾患がある人

■意思表示が出来ない人や自分で操作できない人は使用しないでください。

- ・けがや事故の原因になります。

■乳幼児や子供に使わせないでください。

- ・けがや事故の恐れがあります。

■乳幼児や子供に本機のそばや上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。

- ・けがや事故の恐れがあります。

■交流100Vで使用してください。また、変圧器を用いて使用しないでください。


- ・火災や感電、故障の原因になります。

■電源コードや電源プラグがいたんでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

- ・感電やショート、発火の恐れがあります。
- ・「販売店」・「お客様相談室」・「製造販売元」に点検・修理をご相談ください。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜いてください。また濡れた手でプラグの抜き差しをしないでください。

- ・火災や感電、故障の原因になります。

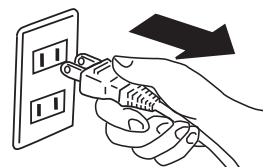

⚠ 警告 安全に使用していただくために




禁止

■電源コードは束ねたり、本体に巻きつけて使用しないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、はさみ込んだりしないでください。

- ・無理な力が加わると、火災や感電、断線の原因になります。

■本機に足を入れたまま立ち上がったたり、右図以外の向きに足を入れないでください。

- ・けがや事故の原因になります。

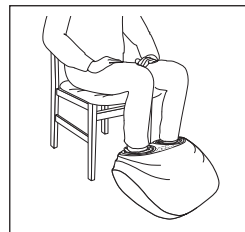

■次の人は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人
- ・妊娠中の人または出産直後の人 ・生理中の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人 ・脚部に重度の血行障害のある人
- ・安静を必要とする人 ・高血圧症の人
- ・体温 38℃以上(有熱期)の人
- 例1. 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期にある人
- 例2. 衰弱している人
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人や骨の弱い人
- ・その他身体に異常のある人や医療機関で治療を受けている人
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人



強制

■**ご使用前に縫製部分の点検をしてください。本体布カバー及びオーバーカバーが破れていたり、外れた状態では絶対に使用しないでください。**

- ・けがをする恐れがあります。発見した場合は使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。ご自分で修理などせず、お買い上げの「販売店」・「お客様相談室」または「製造販売元」に連絡してください。

■本体布カバーを無理に引っ張ったり、ピンや針で突き刺したり、刃物で傷つけたりしないでください。

- ・けがや事故の原因になります。

■使用中に気分が悪くなったり刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、しばらく使用しても効果があらわれない場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- ・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

■はじめは弱い刺激(短い時間)で行って、慣れてきてから刺激を調整してください。

- ・けがをする恐れがあります。

■本機に故障が発見された場合は使用を直ちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・けがや事故を起こす恐れがあります。

■電源プラグは、確実に最後まで差し込んでください。

- ・事故や感電やショート、発火の恐れがあります。

⚠ 警告 安全に使用していただくために



水ぬれ禁止

- 浴室など湿度の高い場所や屋外で使用しないでください。また、本体に水などをこぼさないでください。
 - 感電や故障の原因になります。



分解禁止

- 電源コードが破損している場合は、ご自分で交換せず、「販売店」・「お客様相談室」または「製造販売元」に連絡してください。
- 本機の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。
 - 火災や感電、故障の原因になったり、けがをする恐れがあります。
 - 点検して故障を発見した場合は、ご自分で分解したり修理せず、お買い上げの「販売店」・「お客様相談室」または「製造販売元」に連絡してください。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

- 足以外の部位や物を挿入しないでください。
 - けい部(首)には使用しないでください。
 - けがをする恐れがあります。
- 本機は家庭用マッサージ器です。業務用には使用しないでください。
- 本機は1人用です。2人以上での使用はしないでください。
 - けがをする恐れがあります。
- 素肌に直接あてて使用しないでください。
 - けがの原因になります。
- 足に装身具・装飾品などをつけて使用しないでください。
 - けがや故障の原因になります。
 - 装身具・装飾品が破損する恐れがあります。
- 足のサイズが21cm未満の人は使用しないでください。足のサイズが大きい人は、エア圧力の強さを調整して使用してください。
 - けがをする恐れがあります。
- ストッキングを着用したまま使用しないでください。
 - ストッキングが破れる恐れがあります。
- 使用しながら眠らないでください。
 - 体調が悪くなったり、けがをする恐れがあります。
- 飲酒後や疲労が激しい時には使用しないでください。また食後すぐには使用しないでください。
 - けがや事故の恐れがあります。
- 本機に強い衝撃を与えないでください。
 - 事故や故障の原因になります。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

- 電源プラグを傷つけたり、ピンやごみ、水分を付着させないでください。
 - ・感電やショート、発火の恐れがあります。
- ホットカーペットの上や暖房機器の近くでは使用しないでください。
 - ・火災や故障の原因になります。
- 他の治療器具と同時に使用しないでください。
 - ・体調不良や事故の原因になります。
- 他の電気製品(テレビ、ラジオ、オーディオ機器、電話、FAX等)に近づけて使用しないでください。
 - ・他の電気製品にノイズが入ったり、故障の原因になる恐れがあります。
- 本機を使用しながら、あるいは本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。
 - ・本機が誤作動する恐れがあります。
- キャスター付きの椅子や回転機能が付いた椅子に座って使用しないでください。
 - ・転倒によるけがや事故、故障の原因になります。
- ほこりの多い場所や毛足の長い絨毯などの上で使用しないでください。
 - ・感電やショート、発火の恐れがあります。



強制

- 健康な場合でも、次のような人は健康をそこなう恐れがあるため、使用前に医師に相談してください。
 - ・加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
 - ・過去に心臓や内臓の手術をした人
 - ・打ち身や捻挫、骨折をしやすい人
 - ・乗物酔いの激しい人
- スイッチ、タイマー等が正常で安全に作動するか確認の上、使用してください。
 - ・感電やけがの恐れがあります。
- 本体布カバー及びオーバーカバー部分に異物がついていないことを確認してください。ファスナーが開いていないことを確認して使用してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 足挿入部内に異物が入っていないことを確認してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 本機は床面の水平な場所に置いて使用してください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 指定の付属品(オーバーカバー)を使用してください。(出荷時には取付済)
 - ・けがや事故、故障の原因になります。
- しばらく使用しなかった場合は、本機が正常に作動するか確認してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- コードは容易に離脱しないよう、正しく確実に接続してください。
 - ・ショートや発火の恐れがあります。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用中の注意

■定められた使用時間を越えないようにしてください。

- ・1回の使用時間は7分～15分位(各コースによる。P8参照)が効果的です。長時間の使用は筋肉や神経に対し必要以上の刺激を与え、逆効果になることがあります。
- ・続けて使用する場合は30分以上休んでください。1日あたりの使用時間は通算して30分以内とってください。
- ・体調不良やけがの原因になります。

■マッサージ動作中に電源プラグを抜かないでください。

- ・けがや事故の恐れがあります。

■足のマッサージ以外の目的で使用しないでください。

- ・けがや事故、故障の原因になります。

■手などを入れて使用しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■本機が動作中に足を出し入れしないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■電源コードを持って本機を持ち上げたり、電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。

- ・火災や感電、故障の原因になります。

■布団や毛布等をかぶせて使用しないでください。

- ・火災や感電、故障の原因になります。

■機械内部に水が入らないようにしてください。

- ・火災や感電、故障の原因になります。

■使用中電源コードが体に巻きつかないように注意してください。

- ・けがや事故を起こす原因になります。

■本機の上に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■エアバッグに故意に力を加えたり、尖ったもので傷つけたり、膨らんだエアバッグを踏みつけたりしないでください。

- ・けがや事故、故障の原因になります。



禁止

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用中の注意



強制

- 本機に異常を感じたり、停電などを含む緊急時には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
 - けがや事故を起こす恐れがあります。
- 刺激が強すぎると感じた場合は、厚手の靴下等を履いて使用してください。
 - けがや事故を起こす原因になります。
- 必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。(P10 参照)
 - けがや事故を起こす恐れがあります。
- 身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止してください。
 - けがや事故の恐れがあります。
- 本機の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
 - 事故や健康をそこなう恐れがあります。

ご使用後の注意




プラグ
を抜く

- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源コードは、ねじれをまっすぐに直して保管してください。
 - ホコリや湿気による絶縁の劣化から、漏電火災の原因になります。
 - 乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。



強制

- 持ち運ぶときは、本機底面の両側をしっかり持って運んでください。
 - けがや故障の原因になります。

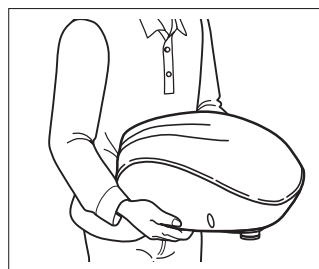


禁止


- 本機を立てて保管しないでください。
 - けがや故障の原因になります。

各部の名称


製品本体

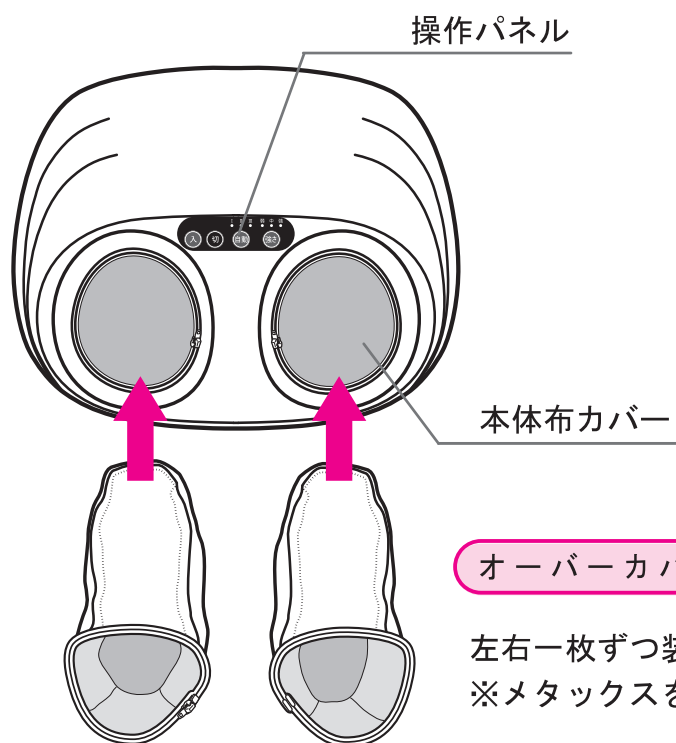


製品表面

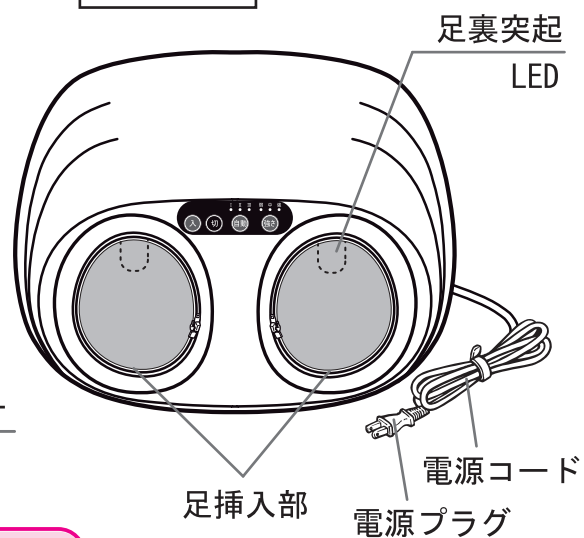


取扱説明書

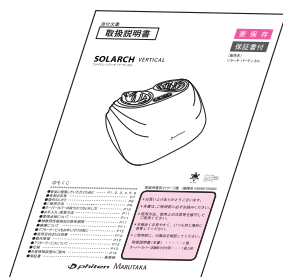

製品底面

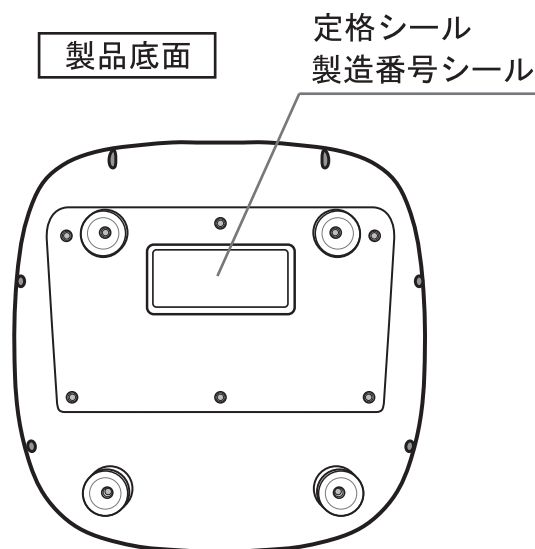


操作パネル

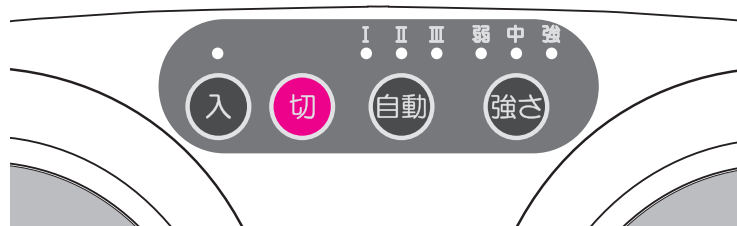


操 作 の し か た

1. 電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。
2. 椅子等に座り、停止時に足挿入口から足を入れます。
3. 足の中心付近(右イラスト参照)に足裏突起が合うように足を移動させてください。

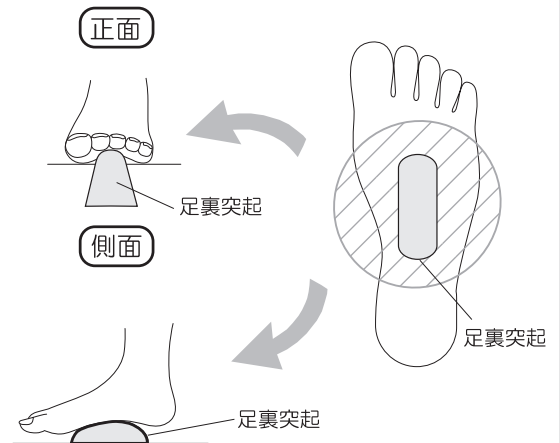

4. 操作部パネルの「入」ボタンを押します。
電源ランプが「切」を示す赤色点灯から緑色点灯に変わります。自動コース「Ⅰ」強さ「弱」でマッサージがスタートします。
5. お好みにより「自動」ボタン、「強さ」ボタンを押して動作を選択してください。

電源ランプ
入： 緑色点灯
切： 赤色点灯

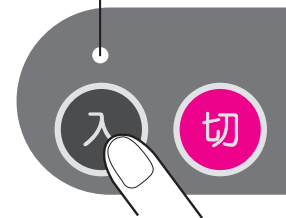

- ◎「自動」コースは、効果的な動作を組み合わせた自動プログラムです。押すたびに3種類の自動コースが切り替わります。

- ・『コースⅠ』バーティカルコース（約13分）：
足全体を捻りと振動によりほぐしていくコース
- ・『コースⅡ』ツイストコース（約7分）：
足先から左右へ捻るようにストレッチさせるコース
- ・『コースⅢ』シェイクコース（約7分）：
足全体をエアで包み、振動によりほぐしていくコース

オートタイマーにより、マッサージは自動的に終了します。また、途中でコースを変更した場合でも、タイマーが最長15分のため、コース内容により15分以内に自動停止することもあります。

（例：コースⅠを12分使用後コースⅡに変更した場合は、コースⅡは約3分で終了）

	コースⅠ	コースⅡ
タイマー	約13分	約7分
	コースⅢ	最 長
	約7分	約15分


- ◎「強さ」を変更したいときは「強さ」ボタンを押してください。押すたびに1段階ずつ3段階で強さが変わります。

6. 途中で動作を止めたい時は「切」ボタンを押してください。

操作パネル

自動コース表示ランプ
(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

強さ表示ランプ
(弱・中・強)

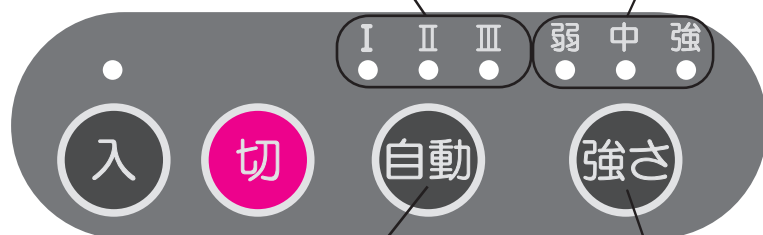

自動コースボタン
(動作切替)

強さボタン
(強さ切替)


ご 使 用 方 法

効果的な使用時間

- ※ 1回の使用時間は7分～15分位(各コースによる。P8参照)が効果的です。
長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激を与え、逆効果になることがありますのでご注意ください。
- ※ 続けて使用する場合は30分以上休んでください。
1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。

⚠ 注意 はじめは弱い刺激で行ってください。

1. 椅子等に座って、膝の角度が90度位になるような姿勢にします。
2. 停止時に足挿入口から足を入れます。
3. 足の中心付近に足裏突起が合うように足を移動させてください。
4. お好みに合わせて足の位置を動かしてマッサージ感を調節してください。
(1) コースⅠ、コースⅡでマッサージをする場合は、足を奥の方に入れてください。
(2) コースⅢでマッサージをする場合は、足を手前の方に入れてください。

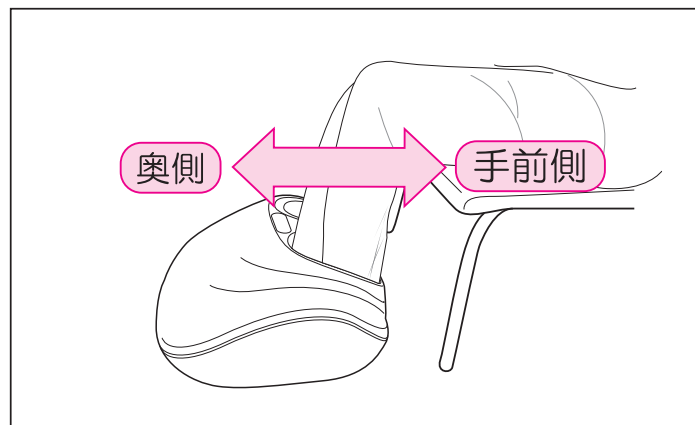

■振動や動作音が気になる場合

板の間など硬い材質の床の上でご使用の際、振動や動作音が気になる場合は座布団やマット等を本機の下に敷くと効果的です。



オーバーカバーの取り付け方と外し方



注意


- ・必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。
- ・面ファスナーは、正しい方向で奥に付けてください。



強制

オーバーカバーは消耗品です。破れなどが発生した場合は「販売店」または「お客様相談室」に連絡し、直ちに新品と交換(有料)してください。

※出荷時には、本機にオーバーカバーが左右それぞれ取り付けてあります。

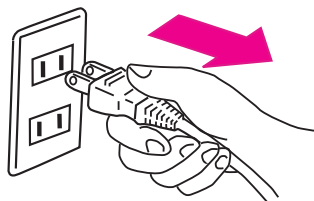


1. 電源プラグを抜く

1.オーバーカバー着脱の際には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。




右用 (スライドファスナー無)
左用 (スライドファスナー・取っ手有)

2.オーバーカバーには左右の違いがあります。

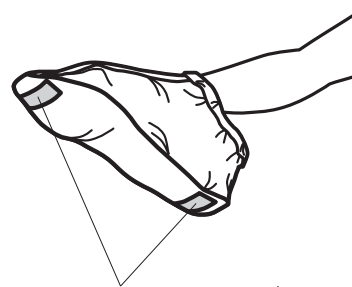


面ファスナー

3.面ファスナーを下にして手を入れてください。

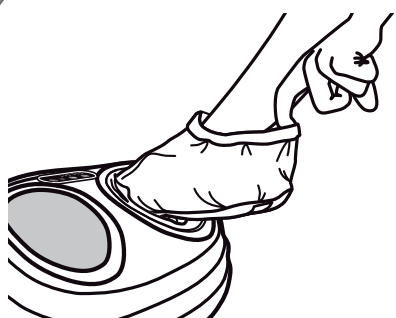

4.手をなるべく奥まで差し込み、つま先部とかかと部の面ファスナーを本体布カバーに貼り付け固定します。

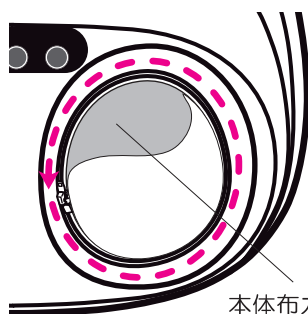

本体布カバー

5.本体布カバーとオーバーカバーのスライドファスナーを合わせ、ゆっくり閉めます。スライドファスナーは、最後まで確実に閉めてください。



分解禁止

本体布カバーは、絶対に取り外さないでください。

※時々、オーバーカバーがずれていないか確認し、ずれている場合は付け直してください。

※間違った取り付け方をすると、足が入れにくくなったり、オーバーカバーが外れやすい原因になります。


■取り外し方

スライドファスナーを外し、面ファスナーを外してから、オーバーカバーを引き抜いてください。


■お手入れ

オーバーカバーは、ご家庭での洗濯（またはドライクリーニング）が可能です。

洗濯をする際は、オーバーカバーの面ファスナーで他の衣類を傷つけないように右図の状態にしてください。

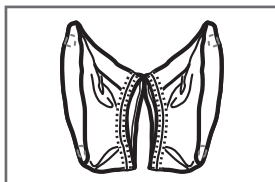

面ファスナーが内側になるようにファスナーを取り付けます。

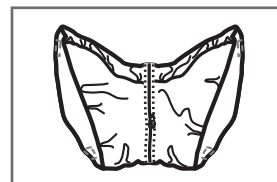

オーバーカバーが袋になるようにして洗濯します。

お手入れ・保管方法

お手入れ・保管



強制

- お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 - ・感電やけがの原因になります。
- 乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。
- 機器及び付属品等は次回の使用の際に支障のないよう清潔に保ち、湿気・ほこりの少ない場所に保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが生地に付着した時は速やかに乾いた布で拭き取ってください。
 - ・変色やシミの原因になります。
- 直射日光が当たる場所や、ストーブ等の近くで高温になる場所は避けてください。
 - ・変色や故障の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
 - ・湿気等で絶縁不良になり、火災の原因になります。



禁止

- シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。
 - ・破損や変色の原因になります。
 - ・本体布カバーは外すことができません。
- 本体の汚れはぬるま湯か石鹸水を含ませよく絞った柔らかい布で拭き取ってください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に、かつ安全に動作することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他異常がある。



故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買上げの「販売店」・「お客様相談室」・「製造販売元」に点検・修理をご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

弊社では本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低3年間保有しています。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です



注意

- ・本機を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。
- ・本機の保証は日本国内での使用に限ります。

アフターサービスをお申し付けの前に

現 象	ここを点検してください	処置方法
動作しない	電源プラグが正しく差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
途中で止まった	タイマーで停止していませんか？	操作パネルの「入」ボタンを押してください。
製品から臭いがする	連続でお使いになっていませんか？	長時間使用しますと製品内部の機構部分から臭いがする事がありますが異常ではありません。
マッサージ音（ポンプ音）	構造上発生する動作音です。	異常ではなく、機能等に影響はありません。
生地とその他が擦れる音	構造上発生する動作音です。	異常ではなく、機能等に影響はありません。
本体ケースが温くなる	—	長時間使用しますと機器の発熱により温くなる場合がありますが異常ではありません。
動作が終了してもエアバッグから空気が抜けない	—	「切」ボタンを押し続け、空気を抜いてください。空気が抜けてから、ゆっくり足を抜いてください。 本機の使用を止め、「販売店」、「お客様相談室」または「製造販売元」にご相談ください。

- ・上記の他に選択した動作と異なる動作をした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、約10秒たってから、再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・これらの処置をされても異常があるときは、お買い上げの「販売店」、「お客様相談室」または「製造販売元」（裏表紙）にご相談ください。
尚、その際はご購入の商品名、製造番号、お買い上げ時期、故障状況等をお知らせください。

消耗品のお求めについて

消耗品（オーバーカバー）のお求めは、お買い上げの販売店またはお客様相談室へお問い合わせください。

使用目的または効果

〔 あんま、マッサージの代用 〕 一般家庭で使用する。

動 作 原 理

本機には、モーターポンプ、バルブ、バイブモーター、制御機器が内蔵されており、モーターポンプでエアを送り込み、エアバッグを収縮・拡張させることによりマッサージを行う。また、バイブモーターからの回転出力を踵部ボードに伝達して振動させマッサージを行う。

アフターサービスについて

■保証書(裏表紙)

保証書は記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

■保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理させていただきます。

■保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■付属品のお求めについて

付属品のお求めはお買い上げの「販売店」または「お客様相談室」へお問い合わせください。

■その他ご不明な場合

点検・修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの「販売店」、「お客様相談室」または「製造販売元」にご相談ください。

仕 様

医 療 機 器 の 区 分	管理医療機器
類 別	機械器具 (77) バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード34662000)
販 売 名	ソラーチ パーティカル
医療機器製造販売認証番号	302AKBZX00019000
機 種 名	0420BE755000
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	35W 回*
振 動 回 転 数	300~1500回/分
エ ア 圧 力	90kPa以下
タ イ マ ー	コースⅠ：13分、コースⅡ：7分、コースⅢ：7分 最長15分
材 料	張地：ポリエステル 操作プレート・ケース：ABS
重 量	6.2kg
寸 法	幅430×奥行400×高さ240mm
電 気 的 安 全 性	電気用品安全法技術基準適合確認済
製 造 販 売 元	株式会社マルタカテクノ 静岡県藤枝市八幡字広通550番1 TEL 054-644-4120 (代表)
製 造 元	XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., CHINA シアメン コンフォートサイエンス & テクノロジーグループ 中国 厦門

*回：2重絶縁構造を表します。

※ 改良のため一部仕様を変更する場合があります。

お客様相談室のご案内

修理・部品のご購入などの相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

*お買い求めの販売店がご不明な場合などは、下記「お客様相談室」へお問い合わせください。

 **0120-510-702**

ファイテン株式会社

午前10時～午後5時（土・日・祝日除く）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

ファイテン株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客様から当社お客様相談室にお知らせいただいたお客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認に利用させていただき、当社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。

当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト <http://www.phiten.com/> に掲載しております。

保証書

ご購入商品名	ソーチバーティカル(機種名 0420BE755000)
無料保証期間	お買上げ日より1年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合、下記に依り無料修理を行う事をお約束するものです。

◆保証条件◆

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理に関しては、修理費をお客様のご負担で申し受けます。
- 本体・専用ACアダプターが保証対象となります。
※専用ACアダプターの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - 不当な改造、当社以外の修理による故障。
 - 落下、移動、輸送時の不注意による損傷。
 - 天災、火災、公害による損傷。
 - ご使用中に生じる生地等の摩耗、部品の消耗などの場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ販売店名、印、お買上げ年月日の記入がない場合。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This appliance has been designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

No servicing is available outside of Japan.

注意) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、当社へお問い合わせください。

お客様ご記入欄

お名前

ご住所 〒

TEL

販売店記入欄

店名

印

住所 〒

TEL

お買上げ年月日

※事情により記載が出来ない場合がございますので、その際は契約書を貼り付けて保管してください。

発売元 **ファイテン株式会社** 〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

株式会社マルタカ 〒104-6007 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアX棟7階