

保証書

このたびは、ファイテン ボディエコーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は
 厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しま
 した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

販売店 記入欄	品番	0421BE772000	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ 年月日※			
	販売店名※ 住所 電話番号			

※販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。
 必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様 記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様 相談室	☎0120-510-702 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)	製造番号	
------------	--	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体・充電台・充電用ACアダプターが保証対象となります。
 ※充電用ACアダプターの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、
 もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
 なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品(充電台、ヘッド部)。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には
 使用いたしません。




ファイテン ボディエコー

保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0421BE772000

- 安全上のご注意 1～2
- 内容物と各部の名称 3
- 充電方法 4
- ご使用方法 5～6
- お手入れ方法 7
- 保管方法 7
- こんなときは 8
- 超音波の確認方法 9
- 定格・仕様 9
- 廃棄方法 9
- 注意 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

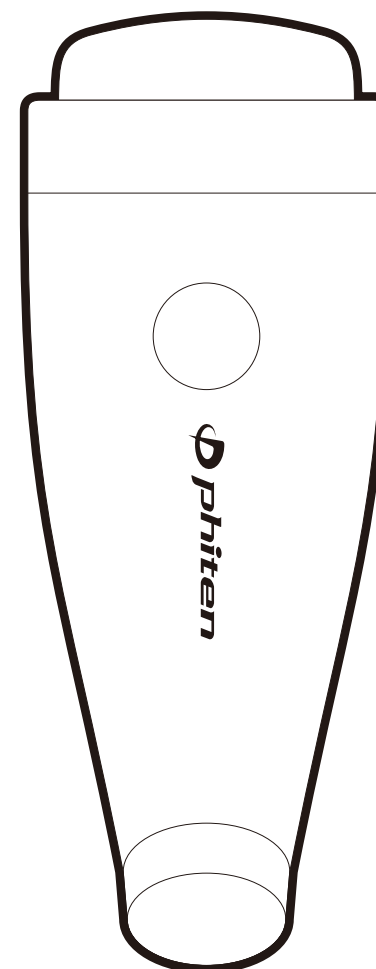

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、
 お買い上げ店からお受け取りください。

本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 ※ここに示した注意事項は本製品を安全に正しくお使い頂き、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。


 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
 注意	人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	 「強制」を示します。 (必ずすること)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。


 警告	
 禁止	●ヘッド部が破損するおそれがありますので、お肌に強く押しつけ過ぎないでください。
	●指定のトリートメント以外の目的には使用しないでください。
	●日本国外では使用しないでください。
	●事故や故障のおそれがありますので、本体、充電台、充電用ACアダプターの修理、分解、改造は行わないでください。
 強制	●火災や発火のおそれがありますので、充電完了後は必ず充電用ACアダプターを抜いてください。
 注意	
 禁止	●ヘッド部を同一部位に長時間固定したままにしないでください。
	●付属の充電用ACアダプター以外は使用しないでください。
	●交流100V～240V以外の電源は使用しないでください。
	●家庭用コンセント以外の電源は使用しないでください。
	●浴槽などに浸けた状態で長時間放置しないでください。

 禁止	●本体、充電台、充電用ACアダプターの上に物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えたりしないでください。
	●充電台や充電用ACアダプターは濡らさないでください。
	●充電台や充電用ACアダプターに、オイル(油分の多い化粧品類も含む)などを付着させないでください。
	●感電や故障の原因となりますので、充電は浴室など湿度の高いところでは行わないでください。
	●お手入れをする際はシンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。
	●充電用ACアダプターのケーブルを極端に折り曲げたり引っばったりしないでください。
 強制	●液漏れの原因となりますので、ヘッド部に先端の尖ったものを当てたり、過度な力をかけたりしないでください。
	●ヘッド部が破損したものは、使用しないでください。
	●ヘッド部にシリコーンを使用しておりますので、シリコーンアレルギーの方はご注意ください。
 強制	●本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止して、販売店に連絡してください。
	●落雷が発生すると、過電流や過電圧で故障する場合がありますので、ご注意ください。

内容物と各部の名称

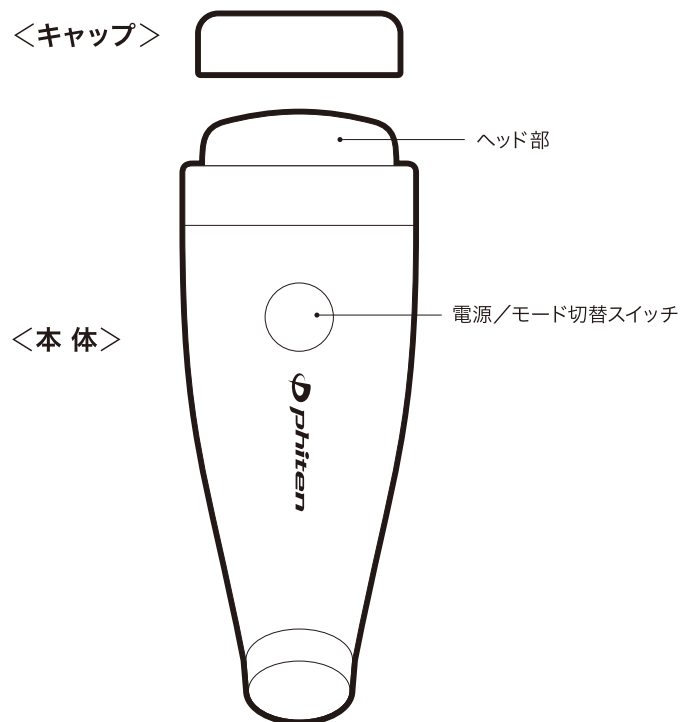

＜付属品＞

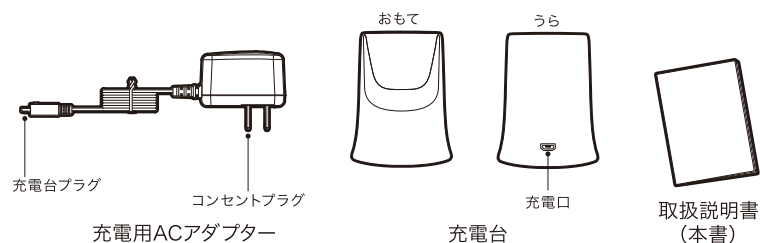

充電方法


1 充電口の充電口に充電用ACアダプターの充電台プラグを差し込んでください。

充電口と充電台プラグの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。

ご注意

※無理に押し込まないでください。


※ショートするおそれがありますので、必ず充電台プラグと充電台を先に接続してください。

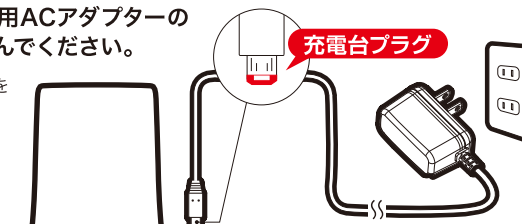

2 充電用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。

ご注意

※感電するおそれがありますので、濡れた手でセットしないでください。

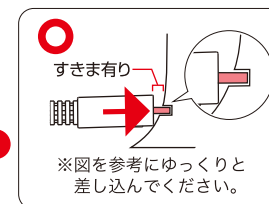


3 充電台に本体をセットしてください。

ヘッド部のライトが点滅します。充電が完了したら、点灯になります。約3～4時間で充電が完了します。


※充電電池残量が多い場合、ライトは点滅せず点灯になりますが故障ではありません。

※連続使用時間目安は約1.5～2時間です。充電残量がなくなりましたら再度充電をおこなってください。

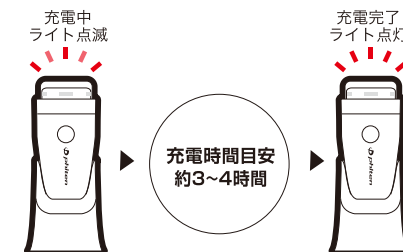

4 充電が完了したら充電用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※充電電池は消耗品です。充電の繰り返しで使用回数に変化がでます。

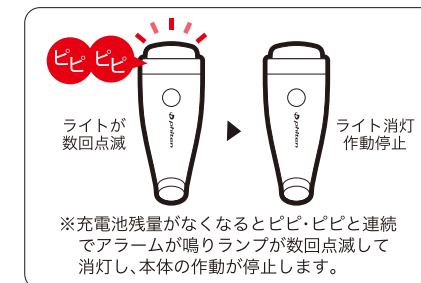

強制

- 充電電池は消耗品になります。充電を繰り返し行ったり、長期間使用しなかったりした場合は少しずつ充電電池が劣化し、ご使用できる時間が短くなります。その場合は、充電電池の交換(有償)をお勧めします。
- 充電電池の消耗を抑えるため、長期間使用にならない場合でも1ヶ月に1回程度充電することを推奨します。

ご使用方法

本製品の1回の稼動時間は約10分です。

※約10分を経過すると自動的に電源が「OFF」になります。

※続けてご使用する場合は5～10分あいだをあげてください。


1 電源／モード切替スイッチを長押し(約2秒)して電源を「ON」にします。

ビッと鳴ったら指を離してください。
モード1で開始します。

ご注意



※ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。
異常が発見された場合はそのまま使用しないで
お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。

※電源／モード切替スイッチを押すときは真ん中を奥まで
しっかり押してください。

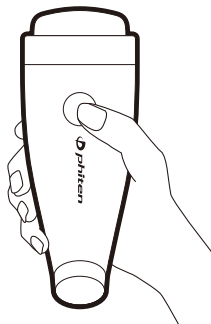

2 必要に応じて電源／モード切替スイッチを短押しし、ご希望のモードにします。

モードは3種類あり、電源／モード切替スイッチを
短押しするたびに、ビッと鳴り
「モード1→モード2→モード3→モード1」と切り替わります。

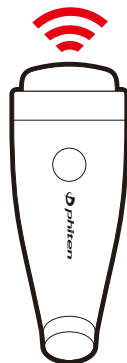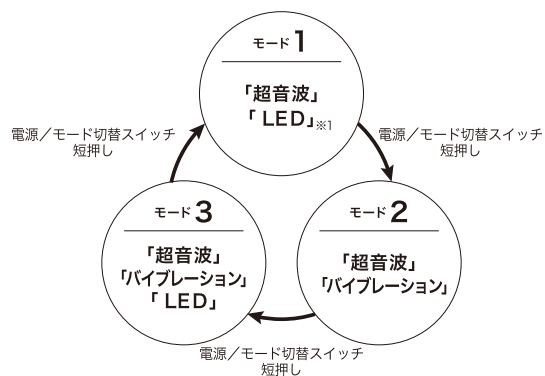

ご使用を途中で中止したい場合は
電源／モード切替スイッチを
長押し(約2秒)すると**電源OFF**
になり作動が停止します。


	モード1	モード2	モード3
超音波	○	○	○
LED	○(点滅)※1	—	○(点灯)
バイブレーション	—	○	○

※1 10秒間に1回の点滅

3 ご希望の部位に本製品を軽く押し当て、ご使用してください。


ご注意

※強く押しつけないでください。
ヘッドが破損するおそれがあります。

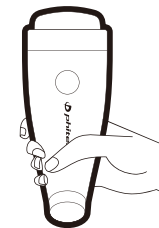

＜基本の動かし方＞

お肌に軽く当て一箇所約5秒固定させます。
ヘッドがお肌に密着するように軽く当てると
効果的に超音波が伝わります。
動かす際は、一旦お肌からはなし
当てる位置を少しずつ変えます。

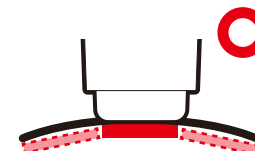

ご注意

※長時間同じ場所に当てないでください。
※再度同一箇所に使用しないでください。
※ご使用中はヘッド部が温かくなります。
お肌の状態により、まれにチリチリとした体感を感じることがあります。

強く押しつけ過ぎないでください。

押しつけながら動かさないでください。
ヘッド部はシリコン素材のため、
変形したり、破れたりする
おそれがあります。



4 ご使用後は必ずキャップを付けて保管してください。

ご注意

※水のかかる場所や高温多湿の場所でキャップを付けずに保管すると、
ヘッドが膨れる場合があります。



強制

●故障の原因となりますので、短時間のあいだに電源／モード切替スイッチのON、
OFFを繰り返さないでください。

お手入れ方法

本製品を清潔に保つため、ご使用のたびにお手入れを行ってください。
電源がOFFになっていることを確認してからお手入れしてください。

ヘッド部




●シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。

- ヘッド部についた汚れは、ウェットティッシュなどで拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は中性洗剤などをご使用ください。

ご注意

※ヘッド部にはシリコーンゴムを使用しています。耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れていますが、ヘッド部を清掃される場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使用しないでください。ヘッド部が溶ける可能性があります。

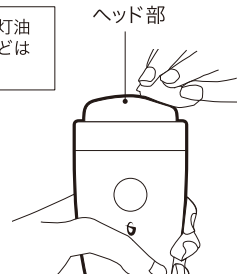


ヘッド部以外



●シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。

- ヘッド部以外についた汚れは、ティッシュや乾いた布などできれいに拭き取ってください。

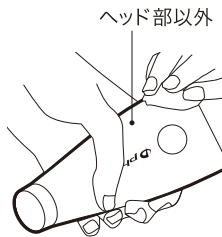

保管方法

ご使用後は、水分を拭き取り、必ずキャップをし、充電台に立て保管してください。



事故、怪我、故障の原因となりますので、次のような場所でのご使用および保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

こんなときは

症 状	考えられる原因	処 置
電源が入らない。	充電電池の残量がない。	充電を行ってください。
電源がすぐ切れる。 充電しても数分しか使えない。	充電が足りない。	充電電池残量がなくなるとビビ・ビビと連続でアラームが鳴りランプが数回点滅して消灯し、本体の動作が停止しますので充電を行ってください。
使用中に電源が切れる。	作動時間がすでに10分経過している。 10分で自動的に電源がOFFになります。	電源を入れてください。
	充電が足りない。	充電を行ってください。
超音波の出力を感じない。	超音波は、体感がありません。	P.9の超音波の確認方法をご参照ください。
ヘッド部が変色している。 ヘッド部が膨れている。	ヘッド部にはシリコーンゴムと液体を使用しています。シリコーンゴムや液体の特性上、ご使用方法や保管環境によりこれらの症状が発生しますが、ご使用上問題ありません。	特に気になる場合は、お買い上げ販売店もしくは発売元にヘッド部の交換依頼(有償)をしてください。
ヘッド部がベタベタしている。 ヘッド部が変形している。	液漏れの可能性があります。	


それでも直らないときは

直ちに使用中止

事故防止のため、必ずお買い求めの販売店、もしくは発売元に、点検修理を依頼してください。

超音波の確認方法

超音波は体感がありません。
電源／モード切替スイッチを長押し(約2秒)して、
電源を入れた状態でヘッド部の中心に
数滴の水をのせてください。
水滴の表面が振動(波打つように)していれば
超音波は正常に出力しています。

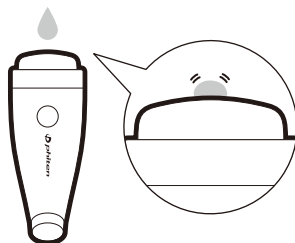

定格・仕様

品名	ファイテン ボディエコー
品番	0421BE772000
電源	AC100-240V 50/60Hz共用
サイズ(本体)	直径約5.6cm×高さ約15.2cm
サイズ(充電台)	直径約7cm×高さ約8.9cm
重量	約282g(本体:170g、充電台:112g)
保証期間	お買い上げ日より1年間

本製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

本製品の使用電池	
名称	リチウムイオン電池
公称電圧	DC3.7V 1500mAh
数量	1本



Li-ion

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※完全に作動しなくなったことを確認すること。

※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

廃棄方法


本製品およびパッケージなどを廃棄する場合はお住まいの自治体が定める廃棄方法に従ってください。

注意

ヘッド部はシリコーンを使用しています。

以下のような状態になった場合は、ご使用を中止し
販売店もしくは発売元にヘッド部の交換依頼(有償修理)をしてください。

- ヘッド部が液漏れしている。
- ヘッド部が変形している。
- ヘッド部がベタベタしている。

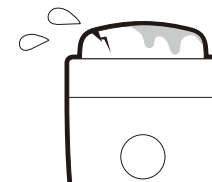

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年としております。

発売元 **ファイテン株式会社**
京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様 **0120-510-702**
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA