


取扱説明書

要 保 存

保証書付

FOOTLIGHT

ファイテン フットライト

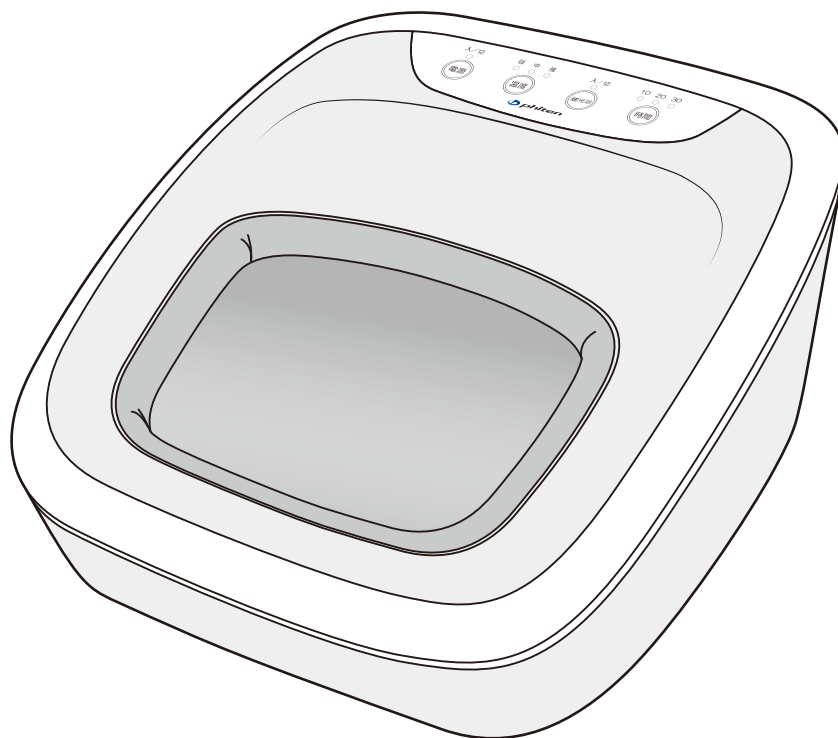

販売名 ファイテン フットライト
(機種名 0418BE750000)

○もくじ

・安全に使用していただくために	1～3
・各部の名称	4
・操作方法	5
・オーバーカバーの着脱方法	6
・お手入れ・保管方法	7
・廃棄について	7
・アフターサービスをお申し付けの前に	8
・アフターサービスについて	9
・仕様	9
・ご相談窓口について	10
・保証書	裏表紙

- ・このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ・本書は、ご使用前に必ずお読みください。
- ・使用方法、使用上の注意等を厳守して安全に正しくお使いください。
- ・本書は、本製品近くの見やすく、いつでもご覧いただける場所に保管してください。
- ・ご使用前に、以下の付属品等を確認してください。

取扱説明書（本書）	・・・1部
ACアダプター	・・・1個
オーバーカバー（本機取り付け済み）	・・・1枚

安全に使用していただくために

ご使用になる人や、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を説明しています。

■説明内容を守らず、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、下記の表示（図表示と用語）で区分し説明しています。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■必ずお守りいただきたい内容の種類を、下記の表示（図表示）で区分し説明しています。



禁止

この記号は、禁止（してはいけないこと）を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は“一般的な禁止”）が書かれています。



強制

この記号は、強制（必ずすること）を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は“一般的な強制”）が書かれています。



警告

安全に使用していただくために



禁止

■次の人は使用しないでください。

- ・ 足に疾患がある人
- ・ 乳幼児やお子様
- ・ 意思表示が出来ない人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人

■お子様に使わせたり、本機のそばや上で遊ばせたり、上に乗らないでください。

- ・ 破損や転倒によるけがの恐れがあります。

■高い温度で長時間の連続使用はしないでください。

- ・ 高い温度（温度「強」など）で、長時間連続使用していると低温やけどを起こす恐れがあります。低めの温度（温度「弱」など）に調節する等、注意してください。

低温やけどについて

- ・ 比較的低い温度（40℃～60℃）のものでも長時間皮膚の同じ箇所に触れていると（使用状態や体質によって異なります）低温やけどを起こす恐れがあります。
- ・ 低温やけどは、皮膚の深部にまでおおよび赤くはれたり水ぶくれができるのが特徴です。
- ・ 万一低温やけどをしたときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

■交流100Vで使用してください。また、変圧器を用いて使用しないでください。

- ・ 火災や感電、故障の原因になります。

■絶対に本機を分解したり、改造したりしないでください。

- ・ 発火したり、異常動作して感電やけがをする恐れがあります。

警告 安全に使用していただくために



禁止

- DCジャックやDCプラグ、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込がゆるい時は使用しないでください。
 - ・感電やショート、発火の恐れがあります。
 - ・「販売店」または「発売元」に点検、修理をご相談ください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
また、DCプラグを抜くときは、アダプターコードを引っ張らないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 浴室等湿度の高い場所で使用しないでください。
また、本体やACアダプターに水をこぼさないでください。
 - ・感電や故障の原因になります。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
 - ・感電の原因になります。



強制

- 低温やけどの恐れがあります。次の人が使用する際は特に注意してください。
 - ・お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節が出来ない人
 - ・皮膚の感覚が弱い人
 - ・皮膚に創傷のある人
 - ・眠気を誘う薬（睡眠薬など）を服用された人
 - ・飲酒や疲労の激しい人
- 本機に故障が発見された場合は使用を直ちに中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 全てのプラグやコードは、安易に離脱しないように正しく確実に差し込んでください。
 - ・事故や感電やショート、発火の恐れがあります。
- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、全てのコードは、ねじれをほどいて保管してください。
 - ・ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電・火災の原因になります。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

注意 安全に使用していただくために



禁止

- 本機をご使用中に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。
 - ・故障やけがの恐れがあります。
- キャスター付きの椅子や回転機能がついた椅子では使用しないでください。
 - ・転倒によるけがや事故の原因になります。
- 足以外の部位や物を挿入しないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 直接素足を入れて使用しないでください。
 - ・けがの原因になります。
- 本機底面部は高温になる恐れがあるので、肌などが触れた状態で使用しないでください。
 - ・けがや事故の原因になります。

注意 安全に使用していただくために



禁止

- 足に装飾品をつけて使用しないでください。
 - ・けがや故障の原因になります。
 - ・装飾品が破損する恐れがあります。
- 使用しながら眠らないでください。
 - ・低温やけどの恐れがあります。
- 飲酒後や疲労が激しい時には使用しないでください。
 - ・事故やけがの恐れがあります。
- 電源プラグにピンやごみ、水分を付着させないでください。
 - ・感電やショート、発火の恐れがあります。
- 機械内部に水が入らないようにしてください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- ホットカーペットの上や暖房機器の近くでは使用しないでください。
 - ・火災や故障の原因になります。
- 犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。
 - ・ペットが本体やコードを痛め、火災の原因になります。
- オーバーカバーを外したまま、または破れたまま使用しないでください。
 - ・内部の構造物により、けがや低温やけどの恐れがあります。
 - ・発見した場合は、お買い上げの「販売店」または「発売元」に連絡してください。
- 布団や毛布などをかぶせて使用しないでください。
 - ・けがや事故、故障の原因になります。
- 電源コード、アダプターコードを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。また、コードを持って本機を持ち上げないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。




強制

- スイッチ等が正常で安全に作動するか確認の上、使用してください。
 - ・感電やけがの恐れがあります。
- 足挿入部分に異物が入っていないことを確認してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 安定のよい場所で使用してください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 指定の付属品（オーバーカバー、ACアダプター）を使用してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 本機に異常を感じたり、停電などを含む緊急時には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 皮膚の弱い人などは、厚手のくつ下をはいて使用してください。
 - ・低温やけどの恐れがあります。
- 持ち運ぶときは、本機底面を両手で持って運んでください。
 - ・けがや故障の原因になります。

各部の名称


製品本体

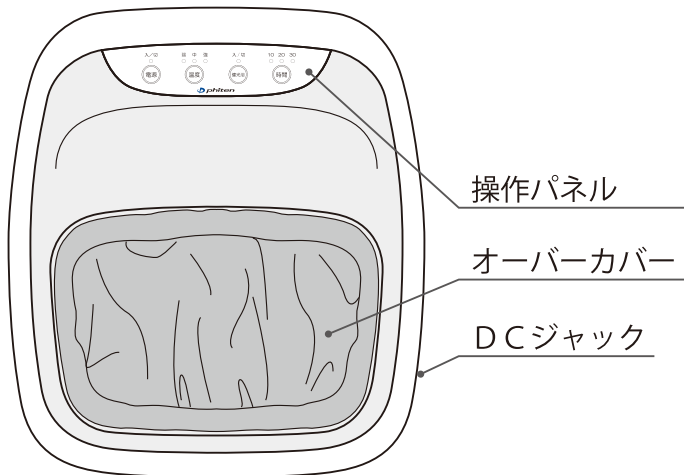

操作パネル




製品内部

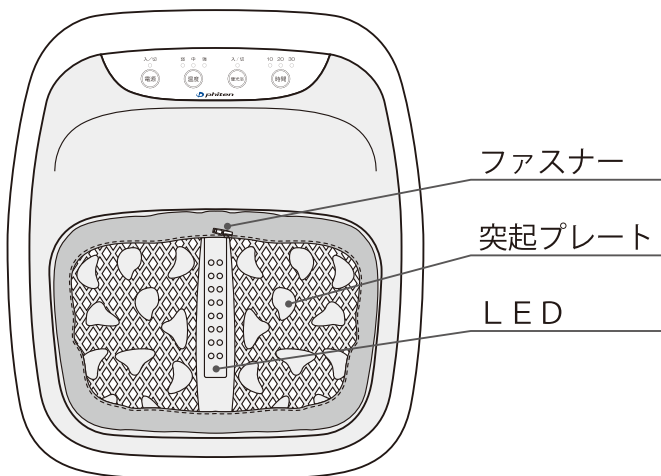


取扱説明書



製品底面


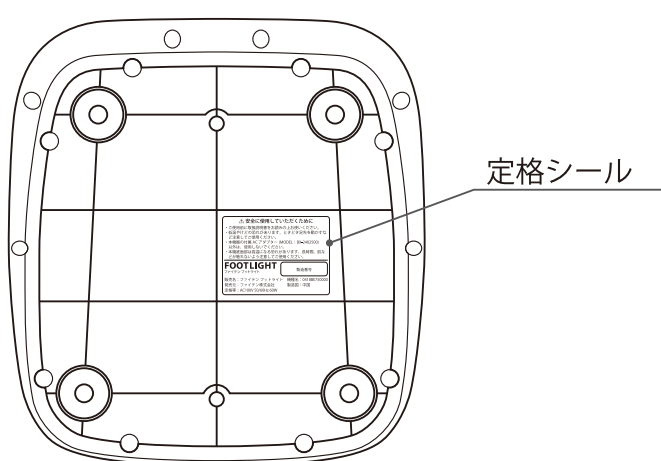


ACアダプター

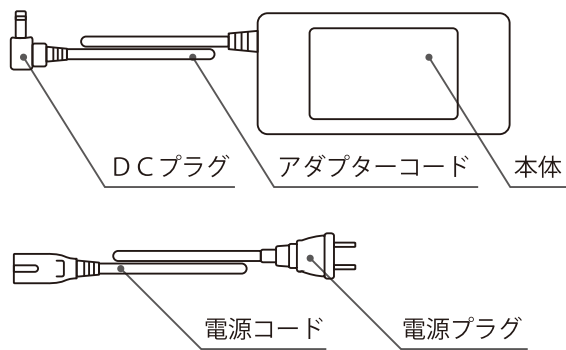

操作方法

1. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに差し込みます。
2. ACアダプター本体と電源コードを接続し、電源プラグをAC100Vのコンセントへ差し込むと、電源ランプが待機状態を示す赤色に点灯します。
3. 椅子等に座って、左右の足をゆっくりと入れてください。
4. 操作パネルの「電源」ボタンを押すと電源ランプが緑色点灯に変わり、温度「弱」、健光浴「入」、タイマー「10」分で動作が開始します。
5. お好みにより「温度」ボタン、「健光浴」ボタン、「時間」ボタンを押して動作を選択してください。
 - ・「温度」ボタン
温度が「弱」→「中」→「強」→「切」の順番で押すたびに動作が切り替わります。
「切」を選択している時は、温度表示ランプは点灯しません。
 - ・「健光浴」ボタン
健光浴が「入」→「切」の順番で押すたびに動作が切り替わります。
「切」を選択している時は、健光浴表示ランプは点灯しません。
 - ・「時間」ボタン
タイマーの設定時間が「10(分)」「20(分)」「30(分)」の順番で押すたびに動作が切り替わります。
動作中にタイマーの時間を変更した場合でも最長30分で自動的に動作が終了します。
最長30分に満たない場合は設定したタイマーの時間で動作が終了します。
(例:「10(分)」を5分間使用後に「30(分)」に変更した場合、約25分後に動作が終了)

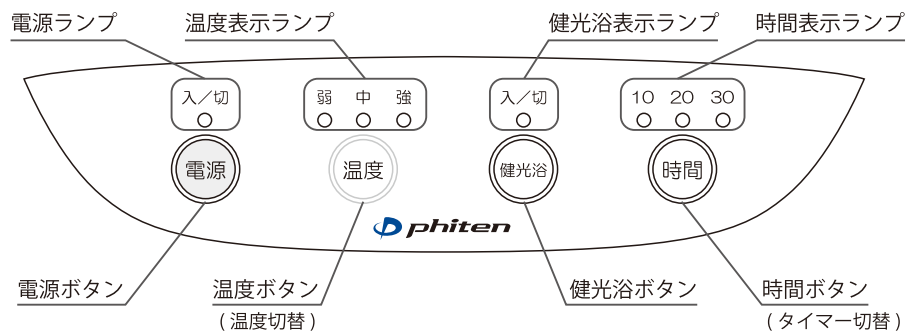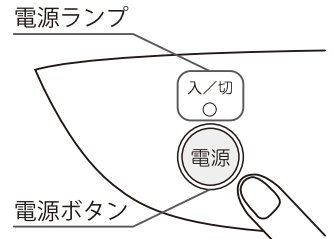


6. 途中で動作を終了する場合は「電源」ボタンを押してください。

⚠ 注意

- 指定の付属品（ACアダプター、オーバーカバー）を使用してください。
 - ・けがや事故の恐れがあります。
- 本機をご使用中に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。
 - ・故障やけがの恐れがあります。
- 皮膚の弱い人などは、厚手のくつ下をはいて使用してください。
 - ・低温やけどの恐れがあります。
- 高い温度で長時間の連続使用はしないでください。
 - ・高い温度（温度「強」など）で、長時間連続使用していると低温やけどを起こす恐れがあります。低めの温度（温度「弱」など）に調節する等、注意してください。

オーバーカバーの着脱方法


■取り付け方

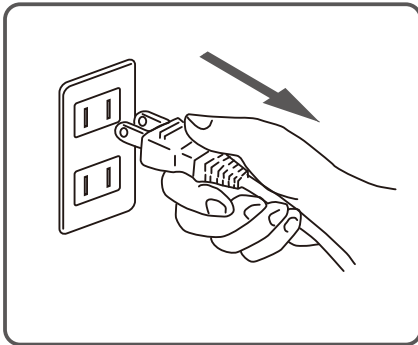

1. オーバーカバー着脱の際には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて作業してください。



2. 面ファスナーを上にして、オーバーカバーに両手を入れてください。

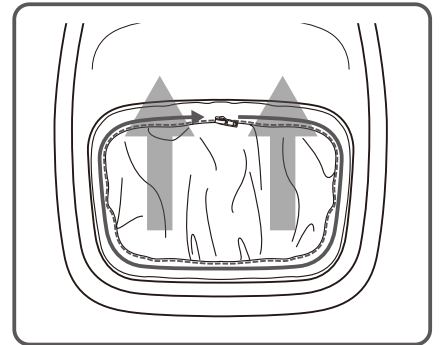

3. 手をなるべく奥まで差込みつま先部とかかと部の面ファスナーを貼り付け固定し、ファスナーを閉めてください。

■取り外し方

ファスナーを外し、つま先部から両手でオーバーカバーをゆっくり引き抜いてください。

※出荷時には、本機にオーバーカバーが取り付けられています。

■お手入れ

オーバーカバーは、ご家庭での洗濯（またはドライクリーニング）が可能です。色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

※ご使用前には、必ずオーバーカバーがずれていないか確認し、ずれている場合は付け直してください。

※間違った取り付け方をすると、オーバーカバーが外れやすい原因になります。



分解禁止

絶対に本機を分解したり、改造したりしないでください。

■付属品のお求めについて

ACアダプター、オーバーカバーをお求めの際は、お買い上げの「販売店」または「発売元」へお問い合わせください。

⚠ 注意

■必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。

・けがや事故を起こす恐れがあります。

■オーバーカバーが破れたまま使用しないでください。

・内部の構造物により、けがをする恐れがあります。

■オーバーカバーは消耗品です。

・破れなどが発生した場合は「販売店」または「発売元」に連絡し、直ちに新品と交換（有料）してください。

お手入れ・保管方法



強制

- 電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
 - ・ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電・火災の原因になります。
- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、全てのコードは、ねじれをほどいて保管してください。
 - ・ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電・火災の原因になります。
- 機器及び付属品は次回の使用の際に支障のないよう清潔に保ち、湿気・ほこりの少ない場所に保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所や、暖房機器の近くで高温になる場所は避けてください。
 - ・変色や故障の原因になります。
- 入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが本機に付着した時は速やかに乾いた布で拭き取ってください。
 - ・変色やシミの原因になります。



禁止

- シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。
 - ・破損や変色の原因になります。
 - ・内部部品は取り外すことが出来ません。本体の汚れはぬるま湯か石鹸水を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
- オーバーカバーが外れたまま保管しないでください。
内部の構造物により、けがや事故、故障の原因になります。

廃棄について



注意

- ・本機を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。
- ・本機の保証は日本国内での使用に限ります。

アフターサービスをお申し付けの前に

現 象	ここを点検してください	処理方法
動作しない	電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	専用ACアダプターが正しく差し込まれていますか？	電源コードをACアダプター本体に、DCプラグを本機に差し込んでください。
途中で止まった	本体のタイマーで切れていませんか？ (電源ランプが赤色点灯の場合)	操作パネルの“電源”ボタンを押してください。
暖かくなならない	温度が「弱」になっていませんか？	温度ボタンを押して「中」に変更してください。
製品から臭いがする	—	初めて使用する場合は臭いがすることがありますが異常ではありません。
本体ケースが温くなる	—	製品の特性上、機器の発熱により温くなる場合がありますが異常ではありません。

※上記の他に選択した動作と異なる動作をした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、約10秒たってから、再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。

※これらの処置をされても異常があるときは、お買い上げの「販売店」または「発売元」にご相談ください。尚、その際はご購入の商品名、製造番号、お買い上げの時期、故障状況等をお知らせください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に、かつ安全に動作することを確認してください。

 愛情点検	このような症状はありませんか？ ■こげくさいにおいがする。 ■アダプターコードやACアダプター本体が異常に熱い。 ■コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ■その他異常がある。	故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの「販売店」または「発売元」に点検・修理のご相談をしてください。
---	--	--

アフターサービスについて

■保証書（裏表紙）

保証書は記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

■保証期間中に修理を依頼された場合

保証書の記載内容に従って修理（または交換）をさせていただきます。

■保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■付属品のお求めについて

付属品のお求めはお買い上げの「販売店」または「発売元」へお問い合わせください。

■その他ご不明な場合

点検・修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの「販売店」または「発売元」にご相談ください。

仕様

販 売 名	ファイテン フットライト
機 種 名	0418BE750000
本 体 寸 法	幅 33cm × 奥行 37cm × 高さ 16.5cm
本 体 重 量	約 2.5kg
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	60W
使 用 電 源 (専用 AC アダプター)	MODEL No.BX-2402500 入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC24V 2.5A
標 準 表 面 温 度	「強」約 46℃ 「中」約 43℃ 「弱」約 40℃
電 源 コ ー ド 長	約 150cm
ア ダ プ タ ー コ ー ド 長	約 120cm
製 造 国	中国
発 売 元	ファイテン株式会社

ご相談窓口について

修理・部品のご購入などの相談は、
まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

＊お買い求めの販売店がご不明な場合などは、下記「お客様相談室」へお問い合わせください。



0120-510-702

ファイテン株式会社

午前10時～午後5時（土・日・祝日除く）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

ファイテン株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客様から当社お客様相談室にお知らせいただいたお客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認に利用させていただき、当社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。

当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト <http://www.phiten.com/> に掲載しております。

保証書

ご購入商品名	ファイテン フットライト (機種名 0418BE750000)
無料保証期間	お買上げ日より 1 年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合、下記に依り無料修理を行う事をお約束するものです。

◆保証条件◆

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間はお買上げ日より 1 年間です。保証期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理に関しては、修理費をお客様のご負担で申し受けます。
- 本体・専用 AC アダプターが保証対象となります。
※専用 AC アダプターの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - 不当な改造、当社以外の修理による故障。
 - 落下、移動、輸送時の不注意による損傷。
 - 天災、火災、公害による損傷。
 - ご使用中に生じる生地等の摩耗、部品の消耗などの場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買上げ販売店名、印、お買上げ年月日の記入がない場合。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

注意) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、当社へお問い合わせください。

お客様記入欄

お名前

ご住所 〒

TEL

販売店記入欄

店名

印

住所 〒

TEL

お買上げ年月日

※事情により記載が出来ない場合がございますので、その際は契約書を貼り付けて保管してください。

発売元

ファイテン株式会社

〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町 678 番地