

保証書

このたびは、ファイテン ソラーチ ハンドストレッチャーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。※本製品の保証は、日本国内でのご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

| | | | | |
|--------|---------------------|--------------|------|-------------|
| 販売店記入欄 | 品番 | 0421BE769000 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| | お買い上げ年月日※ | | | |
| | 販売店名※ 住所 電話番号 | | | |

※販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

| | | | |
|--------|-----|-----------|-------|
| お客様記入欄 | ご住所 | フリガナ 〒 | |
| | お名前 | フリガナ | お電話番号 |

| | | | |
|--------|----------------------------------------|------|--|
| お客様相談室 | ☎0120-510-702 午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く） | 製造番号 | |
|--------|----------------------------------------|------|--|

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体、専用ACアダプターが保証対象となります。
※専用ACアダプターの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担をお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 2) お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 4) 本書の提示が無い場合。
 - 5) 本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 6) 消耗品（オーバーカバー）。
 - 7) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

phiten

ファイテン ソラーチ
ハンドストレッチャー


保管用

取扱説明書

保証書付

品番: 0421BE769000

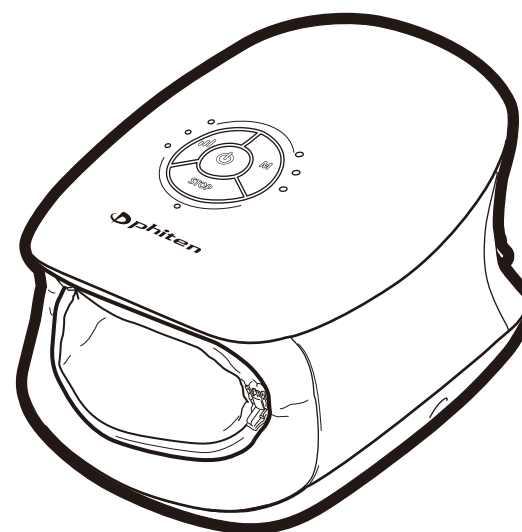

- 安全上のご注意 1～2
- 内容物と各部の名称 3
- ご使用方法 4～5
- お手入れ方法① 6
- お手入れ方法② 7
- 保管方法 8
- こんなときは 9
- 定格・仕様 10
- 付属品および消耗品の
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11





お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、
お買い上げ店からお受け取りください。
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
 ※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 |
|  注意 | 人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。 |






 「禁止」を示します。
(してはいけないこと)

 「強制」を示します。
(必ずすること)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。


警告

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  禁止 | ●怪我や事故のおそれがありますので、自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。 |
| | ●怪我や事故のおそれがありますので、乳幼児や子供に使用させたり、機器本体の上に乗せたり、遊ばせたりしないでください。 |
| | ●ご使用前に縫製部分の点検をしてください。本体布カバーおよびオーバーカバーが破れていたり、外れた状態で絶対に使用しないでください。 |
| | ●コード類を取り外すときは、コードを持って引き抜くなどして、コードの接続部に無理な力をかけないでください。また、コードはねじれをほどいて保管してください。 |
| | ●点検して故障を発見した場合や保護カバーが破れた場合は、ご自分で分解したり、修理せず、お買い上げの販売代理店もしくは発売元に連絡してください。 |
| | ●本製品は防水ではありません。漏電によって感電や発火の原因にもなりますので浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しないでください。 |
| | ●火災や怪我の原因になりますので、電源を入れたまま本体や専用ACアダプターを放置しないでください。 |
| | ●感電や故障の原因になりますので、濡れた手で本体や専用ACアダプターには触れないでください。 |
|  強制 | ●本製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。 |
| | ●刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止してください。 |


| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  強制 | ●はじめは弱い刺激で行ってください。 |
| | ●停電のときは直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
|  注意 | |
|  禁止 | ●手以外の部位や物を挿入しないでください。また、両手を入れて使用しないでください。 |
| | ●火災、感電、故障の原因になりますので、本製品を落としたり、物を載せたり、強い衝撃を加えないでください。 |
| | ●交流100V以外の電源は使用しないでください。 |
| | ●家庭用コンセント以外の電源は使用しないでください。 |
| | ●専用ACアダプターのコードを極端に折り曲げたり、ひっぱったりしないでください。 |
| | ●手や指に装身具を付けて使用しないでください。 |
| | ●ノイズにより誤作動のおそれがありますので、パソコンや携帯電話など精密機器の近くでは使用しないでください。 |
| | ●故障の原因になりますので、本体の操作パネルを強く押したり、叩いたり、尖ったものなどで突いたりしないでください。 |
|  強制 | ●付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。 |
| | ●本製品が正常で安全に作動するか確認の上、使用してください。 |
|  強制 | ●事故や故障のおそれがありますので、本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止して、お買い上げ販売店もしくは発売元に連絡してください。 |

内容物と各部の名称


<本体>

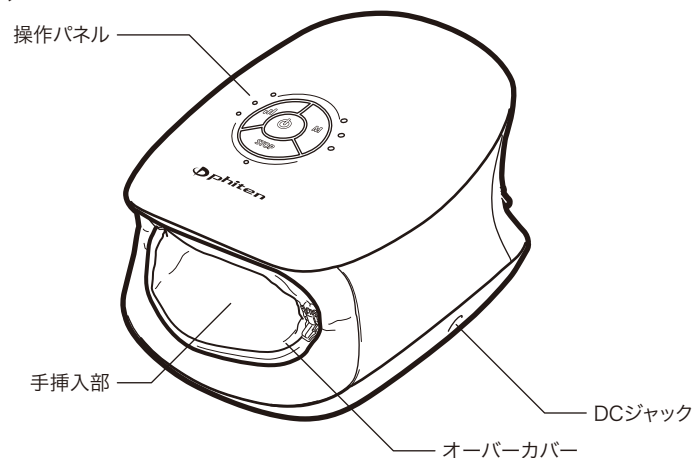

<操作パネル>

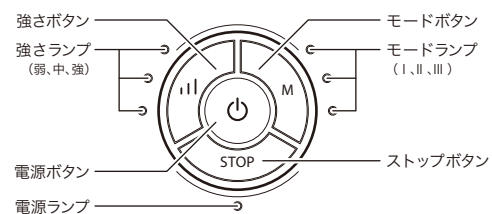

<付属品>

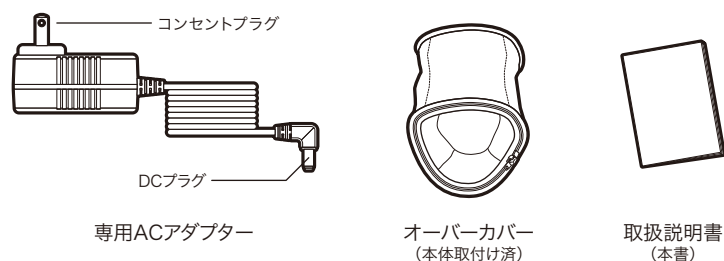


ご使用方法

- 1 DCジャックに専用ACアダプターのDCプラグを差し込んでください。

ご注意


※無理に押し込まないでください。

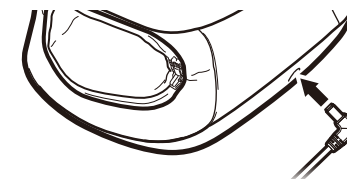


- 2 専用ACアダプターのコンセントプラグをコンセントに差し込んでください。

ご注意


※感電するおそれがありますので、濡れた手でセットしないでください。

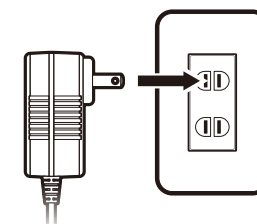

- 3 本体に手を挿入します。

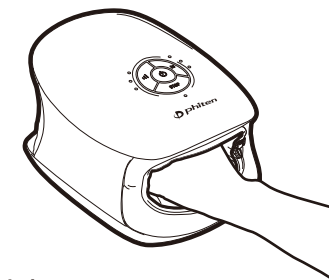

- 4 中指の付け根を内部の突起部先端に合わせます。

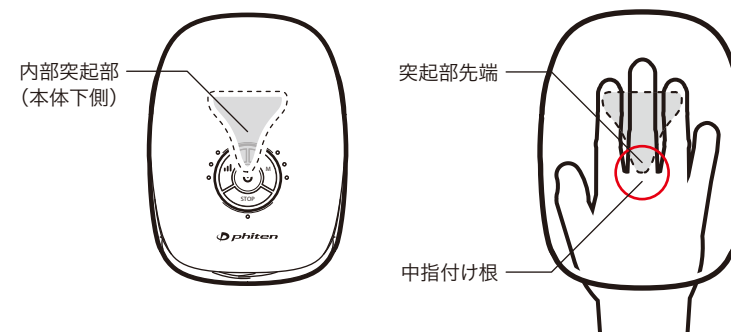


ご使用方法

5 電源ボタン(⏻)を押して、スタートします。




ご注意

※使用前に本体に損傷がないか確認してください。
異常が発見された場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。
※電源ボタンを押すときは真ん中を奥までしっかり押してください。

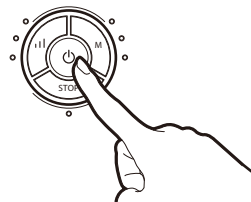

6 モードボタン(M)を押してモードを変更することができます。

| モードⅠ | | モードⅡ | | モードⅢ | |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|
| もみほぐしコース | 約8分 | ストレッチコース | 約5分 | プレスコース | 約5分 |

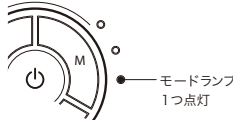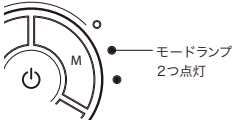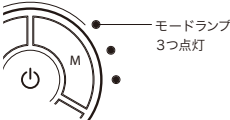
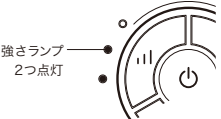
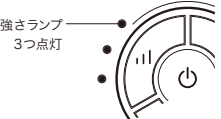
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | モードランプ 1つ点灯 |  | モードランプ 2つ点灯 |  | モードランプ 3つ点灯 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|

- 途中でモードを変更することは可能です。
- モードを変更した場合でもオートタイマーにより、合計10分を超えると自動的に「OFF」になります。

7 強さボタン(||||)を押して強さを変更することができます。

心地よい程度の強さでご使用ください。痛いと感じた場合は、強さを下げてください。


ご注意 ※初めてご使用になる場合は、弱からご使用ください。

| 弱 | 中 | 強 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

8 各モード終了後、自動で電源が「OFF」になります。

- 途中で動作を止めたい場合は(STOP)ボタンを押してください。

ご注意 ※続けて使用する場合は5～10分の間隔をあげてください。

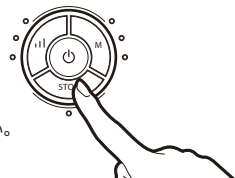

お手入れ方法①



強制

- 必ず動作が停止していることを確認し、コンセントプラグをコンセントから抜いてお手入れを行ってください。

本体


※汚れが付いた時に行ってください。



禁止

- シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯は使用しないでください。

1 コンセントプラグとDCプラグを抜きます。

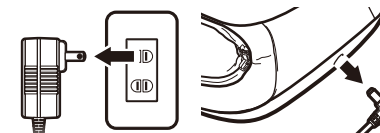

2 水に浸しよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

ご注意 ※本体の水洗いは絶対にしないでください。

- 専用ACアダプターのほこりなどは定期的にとってください。




お手入れ方法②

オーバーカバー

- オーバーカバーは洗濯可能です。以下の手順で取りはずしてお手入れしてください。


- 1 コンセントプラグとDCプラグを抜きます。

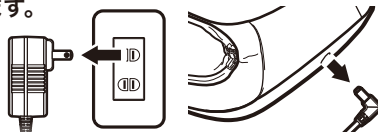

- 2 本体前面のスライドファスナーを外します。



- 3 本体後面のスライドファスナーを外し、本体からオーバーカバーを取り外します。

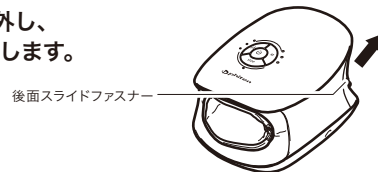

- 4 洗濯の際はネットに入れて洗濯してください。


ご注意

- 洗濯ネットをご使用ください。
- 裏返しにして洗ってください。
- 柔軟剤の使用は避けください。
- 漂白剤の使用は避けください。
- タンブル乾燥処理は避けください。
- アイロンの使用は避けください。
- ドライクリーニングは避けください。
- 長時間水に浸漬させたり、濡れた状態での放置は避けください。
- 汗や摩擦などにより、色落ちや色移りする事があります。



ネット使用

- 5 取り付ける場合は、オーバーカバーの前面と後面を間違えないように取り付けてください。

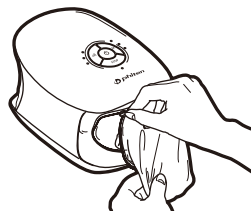

保管方法

- 専用ACアダプターのコードはねじれないように保管してください。
- 保管の際は、水分、汚れ、ホコリをよく拭き取り、水場、高温多湿の場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。




禁止

事故、怪我、故障の原因になりますので次のような場所での使用、および保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具（発熱器具）の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

ご注意 ※しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に、かつ安全に動作する事を確認してください。

こんなときは

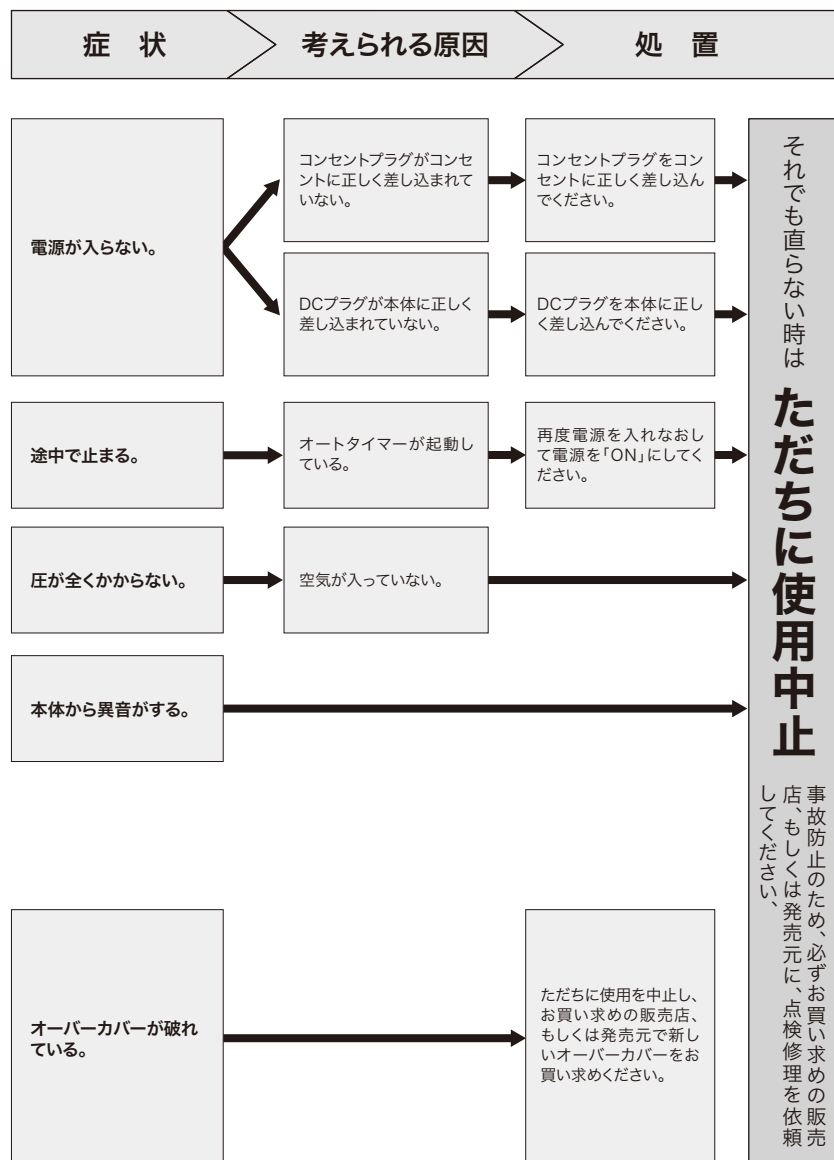

定格・仕様

| | |
|---------|----------------------|
| 品 名 | ファイテン ソラチ ハンドストレッチャー |
| 品 番 | 0421BE769000 |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 消 費 電 力 | 15W 回※ ※二重絶縁構造を表します。 |
| サ イ ズ | 幅18cm×奥行22cm×高さ16cm |
| コード長(m) | 約2m |
| 重 量 | 約1.3kg(専用ACアダプター含む) |
| 保 証 期 間 | お買い上げ日より1年間 |

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

付属品および消耗品のお買い求めについて

消耗品(オーバーカバー)のお求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



ソラチハンドストレッチャー用
オーバーカバー
品番:0421BE769001

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年としております。

発売元 **ファイテン株式会社**
京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様 **☎0120-510-702**
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA