

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴シャワー（消音機能付き）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。
This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0421BE771200	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※ 住所 電話番号			

※販売店様へ: この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。
必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様相談室	 0120-510-702 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)	製造番号	
--------	---	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体、充電用ACアダプターが保証対象となります。
※通信用ケーブル、充電用ケーブルの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品(充電電池、ヘッド部)、ベルト。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。



ファイテン 健光浴シャワー
(消音機能付き)


保管用

取扱説明書

保証書付

品番: 0421BE771200

- 安全上のご注意 1～2
- 内容物と各部の名称 3
- 充電方法 4
- ご使用方法 5～6
- お手入れ方法 7
- 保管方法 7
- こんなときは 8
- 定格・仕様 9
- 廃棄方法 9
- 注意 10
- 付属品および消耗品の
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

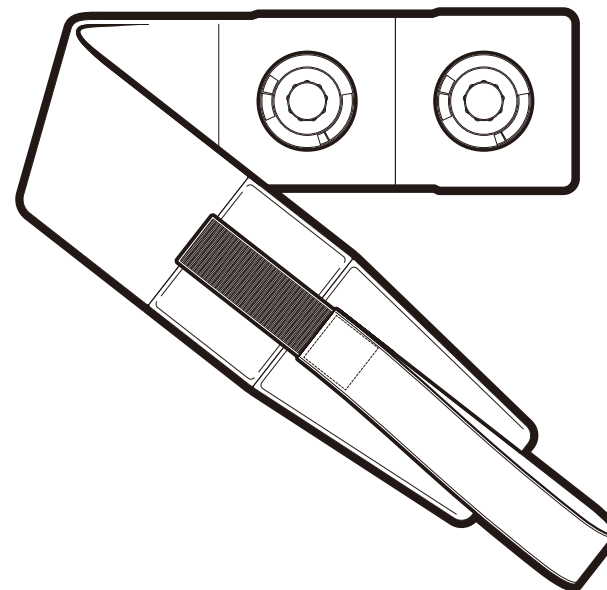

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、
お買い上げ店からお受け取りください。
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使い頂き、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。


 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
 注意	人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	 「強制」を示します。 (必ずすること)

※お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

 警告	
 禁止	●ヘッド部を強く押しつけないでください。
	●事故や故障のおそれがありますので、本体や充電用ACアダプターの修理、分解、改造は行わないでください。
	●異物が入ったままご使用になると、火災、感電、故障の原因となりますので、本体や充電用ACアダプター内部に異物を入れないでください。
 強制	●火災や発火のおそれがありますので、充電完了後は必ず充電用ACアダプターを抜いてください。
 注意	
 禁止	●付属の充電用ACアダプター以外は使用しないでください。
	●交流100V～240V以外の電源は使用しないでください。
	●家庭用コンセント以外の電源は使用しないでください。

 禁止	●本体や充電用ACアダプターの上に物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えないでください。
	●本体(LED)や充電用ACアダプターは濡らさないでください。
	●本体や充電用ACアダプターに、オイル(油分の多い化粧品類も含む)などを付着させないでください。
	●感電や故障の原因となりますので、充電は浴室など湿度の高いところでは行わないでください。
	●お手入れをする際はシンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。
	●充電用ACアダプターのケーブルを極端に折り曲げたり引っばったりしないでください。
	●感電や故障の原因となりますので、ヘッド部に先端の尖ったものを当てたり、過度な力をかけたりしないでください。
 強制	●ヘッド部が破損したものは、使用しないでください。
	●ヘッド部にシリコーンを使用しておりますので、シリコーンアレルギーの方はご注意ください。
	●本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止して、販売店に連絡してください。
	●充電中に落雷が発生すると、過電流や過電圧で故障する場合がありますので、ご注意ください。

内容物と各部の名称

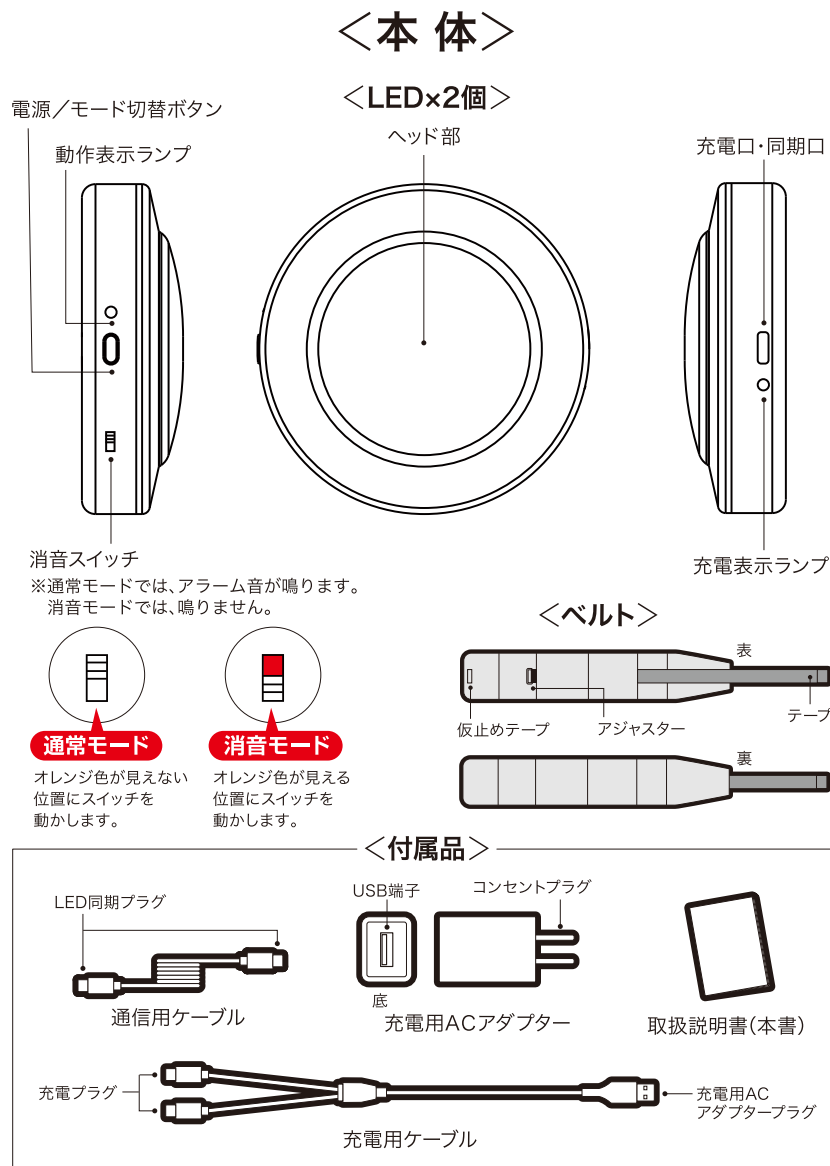


充電方法


- 1 充電口に充電用ケーブルの充電プラグを差し込んでください。**

充電口と充電プラグを確認し、LED2台に差し込んでください。

ご注意
※無理に押し込まないでください。
※ショートするおそれがありますので、必ず充電プラグとLEDを先に接続してください。

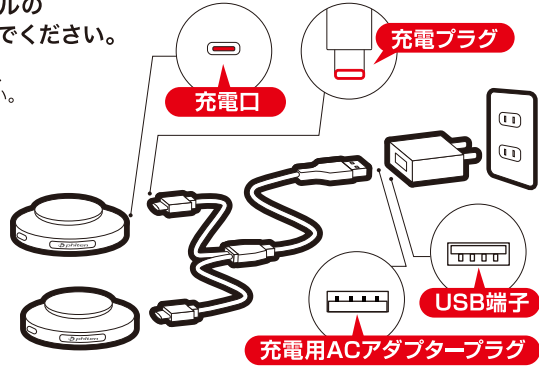
- 2 充電用ACアダプタープラグを充電用ACアダプターのUSB端子に差し込んでください。**

USB端子と充電用ACアダプタープラグの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。

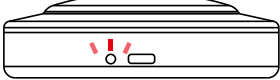

- 3 充電用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。**

充電表示ランプが赤点灯します。
充電が完了したら、緑点灯になります。
約2～3時間で充電が完了します。

ご注意
※感電するおそれがありますので、濡れた手でセットしないでください。
※連続使用時間の目安は約2時間です。
充電残量がなくなりましたら再度充電を行ってください。

充電中
充電表示ランプ赤点灯
充電完了
充電表示ランプ緑点灯

充電電池残量がなくなると充電表示ランプが赤点滅し、本体の作動停止前にピーピーピーとアラームが鳴り、停止します。

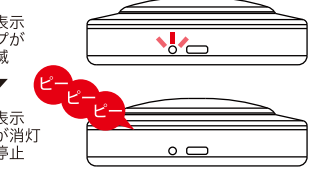

充電表示ランプが点滅
充電表示ランプが消灯
作動停止
ピーピーピー

※消音モードの場合は、アラーム音は鳴らず、停止します。
- 4 充電が完了したら充電用ACアダプターをコンセントから抜いてください。**

※充電電池は消耗品です。
充放電の繰り返しで使用回数に変化がでます。

強制

 - 充電電池は消耗品になります。充電を繰り返し行ったり、長期間使用しなかったりした場合は少しずつ充電電池が劣化し、ご使用できる時間が短くなります。その場合は、充電電池の交換(有償)をお勧めします。
 - 充電電池の消耗を抑えるため、長期間使用にならない場合でも1ヶ月に1回程度充電することを推奨します。

ご使用方法


本製品の1回の稼働時間は30分または60分です。

※1回の稼働時間を経過するとピーーとアラームが鳴り、自動的に電源がOFFになります。

※続けて使用する場合は5～10分、間をあげてください。

※消音モードの場合は、アラーム音は鳴らず、停止します。

1 ベルトの表・裏を確認してください。

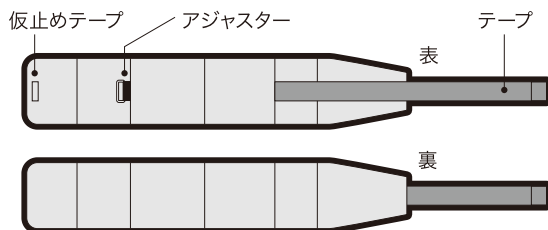


2 LEDの同期口に通信用ケーブルのLED同期プラグを差し込んでください。

LEDどちらか一方のボタン操作で2台とも動作します。
ビッと鳴ったら指を離してください。
動作表示ランプが青色に点灯し、モード1(ロング)で開始します。
※2台同期でご使用の際、消音モードは同期しません。
それぞれの機器にて消音スイッチを操作してください。



3 LEDをベルトの裏側に取り付けてください。

通信用ケーブルが下になるように取り付けてください。

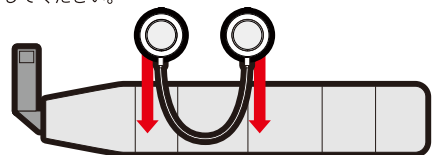


4 電源/モード切替ボタンを長押し(約2秒)して電源をONにします。

通信用ケーブルで接続しない場合でもご使用は可能です。
その場合はLEDそれぞれのボタン操作が必要です。

ご注意

※使用前に本体に損傷がないか確認してください。
異常が発見された場合はそのまま使用しないで
お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。


通常モード		オレンジ色が見えない位置にスイッチを動かします。
消音モード		オレンジ色が見える位置にスイッチを動かします。

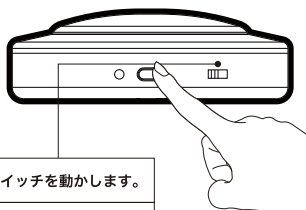

●故障の原因となりますので、短時間の間に電源/モード切替ボタンのON、OFFを繰り返さないでください。

5 必要に応じて電源/モード切替ボタンを短押しし、ご希望のモードにします。


モードは2種類あり、電源/モード切替ボタンを短押しするたびに、
ビビッと鳴り「モード1(ロング)→モード2(ショート)→電源OFF」と切り替わります。
※消音モードの場合は、アラーム音は鳴らず、停止します。

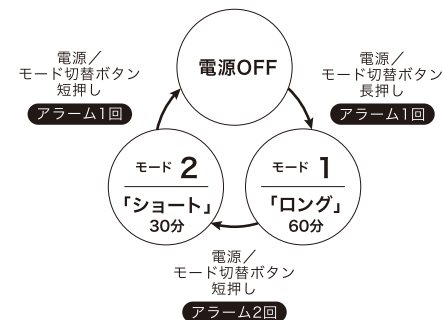


	モード1 (ロング)	モード2 (ショート)
自動OFF	60分	30分
温度制御	38~40℃	
動作表示ランプ	○(青点灯)	○(青点滅)

6 ベルトをご希望の部位の位置で合わせます。


右図は、腰に取り付けた場合のイメージです。

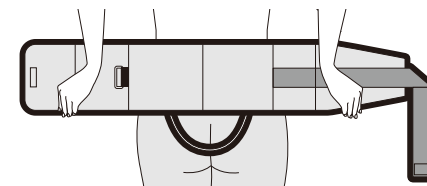

7 ベルトのテープをアジャスターに通します。

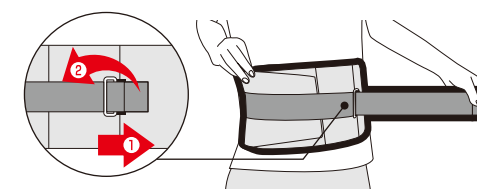

8 テープ部分を折り返して留めます。

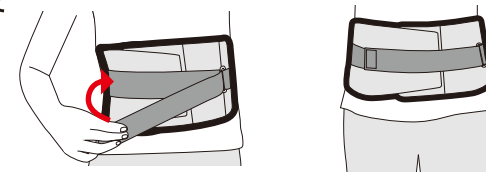

9 使用後は必ず、電源OFFにして保管してください。

お手入れ方法

本製品を清潔に保つため、定期的にお手入れを行ってください。
電源がOFFになっていることを確認してからお手入れしてください。

LED




●シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。

- ヘッド部についた汚れは、ウェットティッシュなどで拭き取ってください。
- ヘッド部以外についた汚れは、ティッシュや乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤などをご使用ください。

ご注意

※ヘッド部にはシリコンゴムを使用しています。耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れていますが、ヘッド部を清掃される場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使用しないでください。ヘッド部が溶ける可能性があります。

※ヘッド部まわりの金属部分にはアルミを使用しています。素材の特性上、経年劣化により表面が濁ってることがありますが、ご使用上問題ございません。

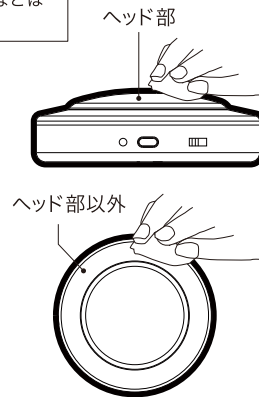

ベルト

- ベルトに同梱の<ご使用上の注意>をお読みください。

保管方法

- ご使用後は、汚れやホコリを拭き取り、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。



事故、怪我、故障の原因となりますので、次のような場所での保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具（発熱器具）の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

こんなときは

症 状	考えられる原因	処 置	それでも直らないときは 直ちに使用中止 事故防止のため、必ずお買い求めの 販売店、もしくは発売元に、 点検修理を依頼してください。
電源が入らない。	充電池の残量がない。	充電を行ってください。	
電源がすぐ切れる。 充電しても数分しか使えない。	充電が足りない。	充電を行ってください。	
使用中に電源が切れる。	作動時間がすでに設定したモードの時間を経過している。 モード1(ロング)60分、 モード2(ショート)30分で自動的に電源がOFFになります。	電源を入れてください。	
LEDの電源ボタンを長押ししても1台しか電源がONにならない。	通信ケーブルのLED同期プラグが、LEDの同期口に正しく差し込まれていない。	通信ケーブルのLED同期プラグを正しく差し込んでください。	
	通信ケーブルが断線している。		
ヘッド部がベタベタしている。 ヘッド部が変色している。	ヘッド部にはシリコンゴムを使用しています。シリコンゴムの特性上、ご使用方法や保管環境によりこれらの症状が発生しますが、ご使用上問題ありません。	特に気になる場合は、お買い上げ販売店もしくは発売元に点検修理(有償)を依頼してください。	

定格・仕様

品名	ファイテン 健光浴シャワー(消音機能付き)
品番	0421BE771200
保証期間	お買い上げ日より1年間

LED定格・仕様	
電源	AC100-240V 50/60Hz共用
サイズ	直径約8.5cm×高さ約2.7cm
重量	約118g

MADE IN CHINA

ベルト		
サイズ	ウエスト	70cm～115cm
	製品縦横	縦約15cm×横約145cm

MADE IN TAIWAN

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

本製品の使用電池	
名称	リチウムイオンポリマー電池
公称電圧	DC3.7V 650mAh
数量	1個



Li-ion

この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※完全に作動しなくなったことを確認すること。

※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

廃棄方法


本製品およびパッケージなどを廃棄する場合はお住まいの自治体が定める廃棄方法に従ってください。

注意

ヘッド部はシリコーンを使用しています。

以下のような状態になった場合は、使用を中止し販売店もしくは発売元に点検修理(有償)を依頼してください。

- ヘッド部が変形している。
- ヘッド部が破れている。

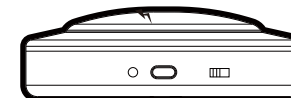

付属品および消耗品のお買い求めについて

付属品および消耗品(通信用ケーブル、充電用ケーブル)のお求めは、お買い上げの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。



健光浴シャワー 充電用ACアダプター
品番:0421BE771006



健光浴シャワー 通信用ケーブル
品番:0421BE771005



健光浴シャワー 充電用ケーブル
品番:0421BE771007

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年としております。

発売元 **ファイテン株式会社**
京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様 **0120-510-702**
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

LED: MADE IN CHINA
ベルト: MADE IN TAIWAN