

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴シャワー（消音機能付き）、通信ケーブルなしをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0421BE771210	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※ 住所 電話番号			

※販売店様へ：この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。
必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様相談室	☎0120-510-702 午前10時～午後5時（土・日・祝日を除く）	製造番号	
--------	--	------	--

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理いたします。
2. 本体、専用ACアダプターが保証対象となります。
※専用充電用USBケーブルの断線による故障の場合は保証対象外となります。
3. 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
4. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 2) お買い上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
 - 3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変並びに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障および損傷。
 - 4) 本書のご提示が無い場合。
 - 5) 本書の全てに記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 6) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6. この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
7. 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

phiten


ファイテン 健光浴シャワー
（消音機能付き）、通信ケーブルなし

保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0421BE771210

- 安全上のご注意 1～2
- 内容物と各部の名称 3
- 充電方法 4
- ご使用方法 5～6
- お手入れ方法 7
- 保管方法 7
- こんなときは 8
- 定格・仕様 9
- 廃棄方法 9
- 注意 10
- 付属品および消耗品の
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

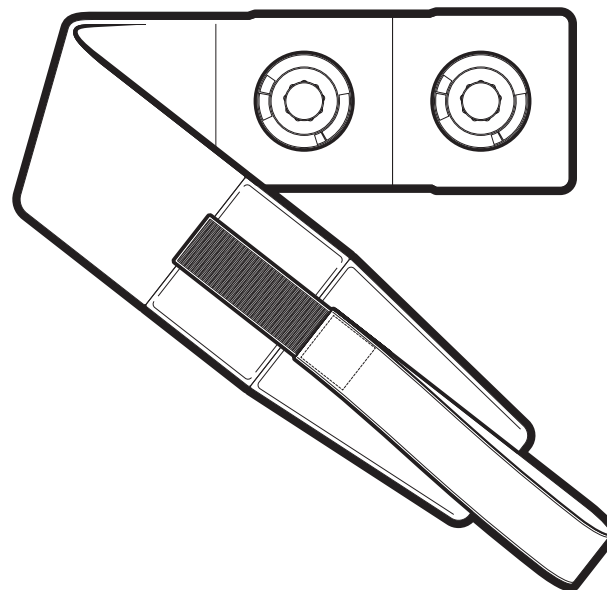

※ベルトはオプションです。

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。保証書は「お買い上げ年月日、販売店名、お客様名」などの全てに記入し、必ずお確かめのうえ、お買い上げ店からお受け取りください。
梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。

安全上のご注意

※本製品は家庭用です。

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※各部に破損、亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してご使用ください。

※ここに示した注意事項は本製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。


	警告	誤った取扱いをした時に死亡や重症に結びつく可能性があるもの		「警告・注意」を示します。
	注意	誤った取扱いをした時に人への障害または家屋、家財などの損害に結びつくもの		「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
				「強制」を示します。 (必ず守ること)

※お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

 警告	
 禁止	●ヘッド部を強く押しつけないでください。
	●お子様の手の届くところに保管しないでください。
	●本製品にはリチウムイオンポリマー電池が内蔵されております。炎天下や夏場の車内など、60℃以上の高温になる場所での充電、放置はしないでください。
	●高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管したり、使用しないでください。また、加熱したり、火中に投下しないでください。発火や発熱、火傷、故障の原因になります。
	●USBプラグに液体やホコリ、異物を付着させないでください。液体やホコリ、異物が付着すると絶縁不良となり、火災の原因になります。
	●火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本体の変形によるショート、発火の原因になります。
	●本体内蔵充電電池から液漏れした時は、素手で液に触れないでください。そのまま放置しますと皮膚の炎症や失明などの原因になります。※万一触れた場合は、水でよく洗い医師に相談してください。
	●分解や修理、改造をしないでください。発火、故障、事故、火災、感電、けがの原因になります。修理が必要な場合はお買い求めの販売店、もしくは発売元に、点検修理を依頼してください。
	●浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用や保管をしないでください。本体を水につけたり、水をかけたりして丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り込み、感電、ショート、発火、火災、故障の原因になります。
	●充電中や運転中にお手入れをしないでください。ショート、感電、火災、けがの原因になります。

 強制	●リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時は、直ちに火気から遠ざけてください。
	●異常時や故障時は、直ちに使用を中止し、お客様相談室までお問合せください。
	●使用しない時や充電しない時は専用充電用USBケーブルを充電用プラグ差し込み口から、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。発熱、事故、故障の原因になります。
	●専用充電用USBケーブルを取り扱う時は、次のことを守ってください。 感電、けが、発熱、火災、事故、故障の原因になります。 ○必ず付属の専用充電用USBケーブルを使用してください。 付属の専用充電用USBケーブルは本製品専用です。他製品に転用しないでください。 ○専用充電用USBケーブルを突っ張った状態で使用しないでください。 ○専用充電用USBケーブルを乱雑に扱ったり、重いものをのせたり、機器に挟み込んだり、損傷したものは使用しないでください。 ○濡れた手で専用充電用USBケーブルの抜き差しをしないでください。 ○USBプラグはホコリや汚れ、接続の方向を確認して、専用ACアダプターやUSB差し込み口へ確実に根本まで差し込んでください。 ○専用充電用USBケーブルを専用ACアダプターから抜く時は、ケーブル部を引っ張らず、専用ACアダプターとUSBタイプAプラグを持ってまっすぐ引き抜いてください。 ○充電時以外は専用充電用USBケーブルを専用ACアダプターやUSB差し込み口から抜いてください。 ○専用充電用USBケーブルを束ねたまま使用や充電しないでください。 ○専用充電用USBケーブルやUSBプラグが通電しなかったり、傷んだり、破損した時は使用しないでください。 ○熱がこもる場所や高温になる場所での充電はしないでください。
 注意	
 禁止	●高所から落としたり、強い衝撃を与えないでください。発熱や破裂、発火の原因になります。
	●本体や専用ACアダプターに、オイル(油分の多い化粧品類も含む)などを付着させないでください。
	●お手入れに台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系／アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。
	●感電や故障の原因になりますので、ヘッド部に先端の尖ったものを当てたり、過度な力をかけたりしないでください。
 強制	●ヘッド部が破損したものは、使用しないでください。
	●ヘッド部にシリコーンを使用しておりますので、シリコーンアレルギーの方はご注意ください。
	●充電中に落雷が発生すると、過電流や過電圧で故障する場合がありますので、ご注意ください。
	●パソコンなどでは充電せず、付属の専用ACアダプターで充電してください。

内容物と各部の名称

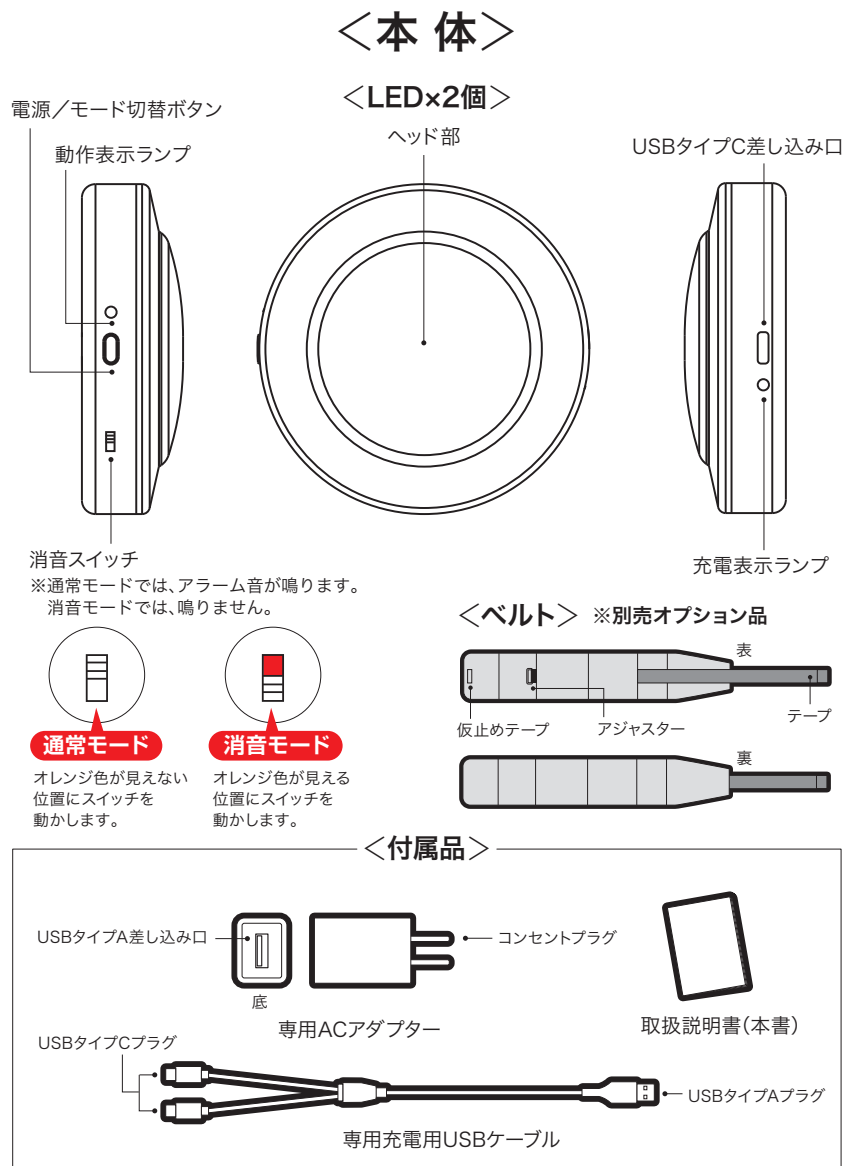

充電方法

- 1 USBタイプC差し込み口に専用充電用USBケーブルのUSBタイプCプラグを差し込んでください。**

USBタイプC差し込み口とUSBタイプCプラグを確認し、LED2台に差し込んでください。
充電しながらでもご使用いただけます。



ご注意
※無理に押し込まないでください。
※ショートするおそれがありますので、必ずUSBタイプCプラグと本体(LED)を先に接続してください。
- 2 USBタイプAプラグを専用ACアダプターのUSBタイプA差し込み口に差し込んでください。**

USBタイプA差し込み口とUSBタイプAプラグの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。
- 3 専用ACアダプターをコンセントに差し込んでください。**

充電表示ランプが赤点灯します。
充電が完了したら、緑点灯になります。
約3~4時間で充電が完了します。
(本体電源OFFの状態での充電の場合)
※充電保護のため、低速充電を採用しております。

ご注意
※感電するおそれがありますので、濡れた手でセットしないでください。
※連続使用時間の目安は約2時間です。
充電残量がなくなりましたら再度充電を行ってください。
※長くお使いいただくため、充電表示ランプが赤点滅したら充電することをおすすめします。
- 4 充電が完了したら専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。**

※充電電池は消耗品です。
充放電の繰り返しで使用回数に変化がります。

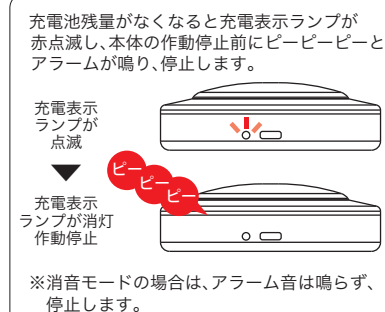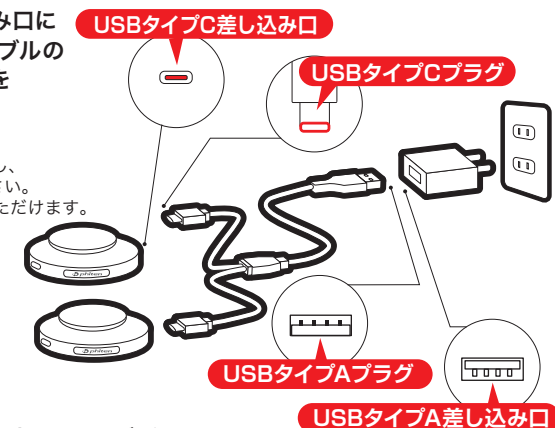

強制

- 充電電池は消耗品になります。充電を繰り返し行ったり、長期間使用しなかったりした場合は少しずつ充電電池が劣化し、ご使用できる時間が短くなります。
- 充電電池の消耗を抑えるため、長期間使用にならない場合でも1ヶ月に1回程度充電することをおすすめします。

ご使用方法

本製品の1回の稼働時間は30分または60分に設定できます。

※1回の稼働時間を経過するとピーーとアラームが鳴り、自動的に電源がOFFになります。


※続けてご使用する場合は5～10分、間をあげてください。

※消音モードの場合は、アラーム音は鳴らず、停止します。


※バッテリーが熱を持ち負担が大きくなるので最大1時間で電源は切れるようにされています。

1 ベルトの表・裏を確認してください。

※ベルトは含まれておりません。
別売オプション品となります。

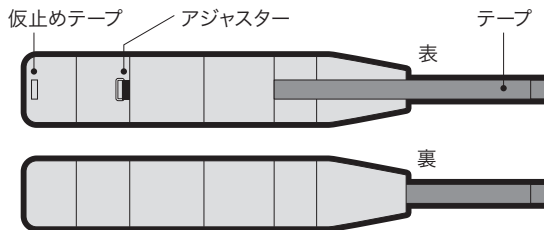

2 本体(LED)をベルトの裏側に取り付けてください。

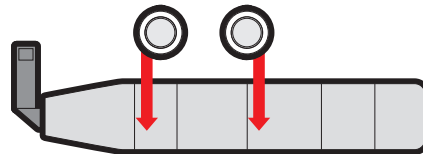


3 電源/モード切替ボタンを長押し(約2秒)して電源をONにします。

本体(LED)のボタン操作が必要です。

ご注意

※使用前に本体に損傷がないか確認してください。
異常が発見された場合はそのまま使用せず
お買い上げの販売店もしくは発売元
にお問い合わせください。

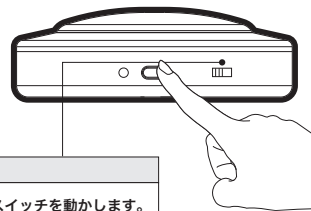


消音スイッチ		
通常モード		オレンジ色が見えない位置にスイッチを動かします。
消音モード		オレンジ色が見える位置にスイッチを動かします。



●故障の原因になりますので、短時間の間に電源/モード切替ボタンのON、OFFを繰り返さないでください。

4 必要に応じて電源/モード切替ボタンを短押しし、ご希望のモードにします。

モードは2種類あり、電源/モード切替ボタンを短押しするたびに、アラーム音が鳴り「モード1(ロング)→モード2(ショート)→電源OFF」と切り替わります。
※消音モードの場合は、アラーム音は鳴らず、停止します。

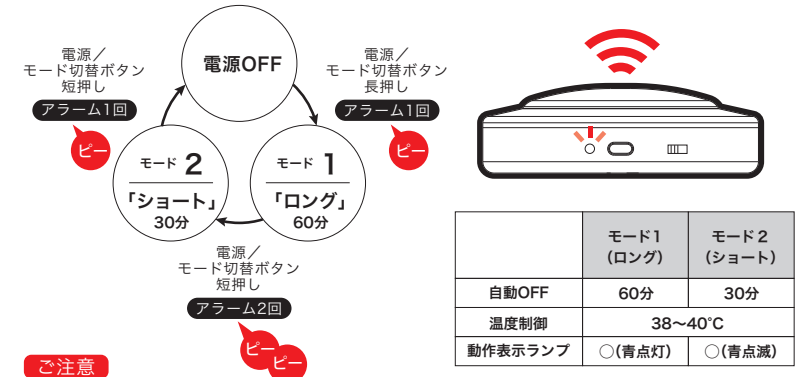


ご注意

※繰り返しご使用になると本体が熱くなることがあります。
少し休ませてからご使用ください。


5 ベルトをご希望の部位の位置で合わせます。

右図は、腰に取り付けた場合のイメージです。


※ベルトは含まれておりません。
別売オプション品となります。

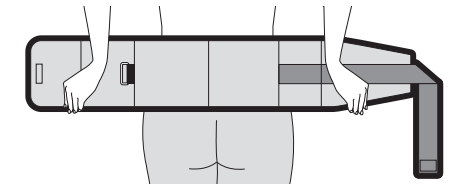

6 ベルトのテープをアジャスターに通します。

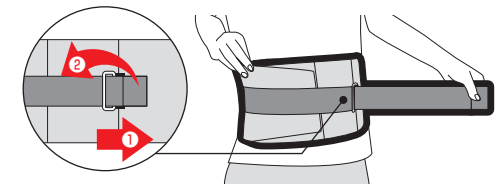

7 テープ部分を折り返して留めます。

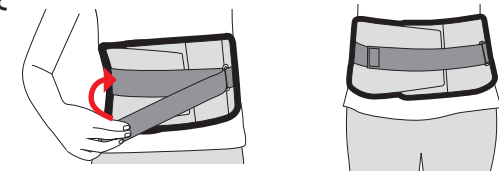


8 使用後は必ず、電源OFFにして保管してください。

お手入れ方法

製品を安全にご使用いただくため、定期的にお手入れを行ってください。
電源がOFFになっていることを確認してからお手入れしてください。


- ヘッド部についた汚れは、ウェットティッシュなどで拭き取ってください。
- ヘッド部以外についた汚れは、ティッシュや乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤などをご使用ください。

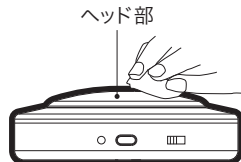

ご注意

※ヘッド部にはシリコンを使用しています。耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れていますが、ヘッド部を清掃される場合、強酸性や強アルカリ性の溶剤は使用しないでください。ヘッド部が溶ける可能性があります。

※ヘッド部まわりの金属部分にはアルミを使用しています。素材の特性上、経年劣化により表面が濁ってくることがありますが、ご使用上問題ございません。

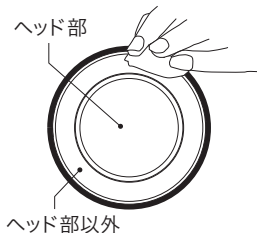

●お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しないでください。塩素系／アルカリ系の洗剤や、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しないでください。

保管方法

- ご使用後は、汚れやホコリを拭き取り、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。



事故、けが、故障の原因になりますので、次のような場所での保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

こんなときは

症 状	考えられる原因	処 置	
電源が入らない。	充電が足りない。	充電を行ってください。	それでも直らないときは 直ちに使用中止 事故防止のため、必ずお買い求めの 販売店、もしくは発売元に、 点検修理を依頼してください。
電源がすぐ切れる。 充電しても数分しか使えない。	満充電できていない 可能性があります。	充電を行ってください。	
使用中に電源が切れる。	作動時間がすでに 設定したモードの時間 を経過している。 モード1(ロング)60分、 モード2(ショート)30分 で自動的に電源がOFFに なります。	電源を入れてください。	
満充電しても 1時間も使用できない。	充電電池の劣化が 考えられます。	〈レンタルご契約者の場合〉 販売店で交換をお申し出 ください。 〈レンタルご契約者でない場合〉 お買い上げの販売店もしくは 発売元に充電電池交換(有償) を依頼してください。	
ヘッド部がベタベタ している。 ヘッド部が変色している。	ヘッド部にはシリコンを 使用しています。 シリコンの特性上、 ご使用方法や保管環境に よりこれらの症状が 発生しますが、ご使用上 問題ありません。	P7の「お手入れ方法」 を参考にお手入れを してください。	

定格・仕様

品名	ファイテン 健光浴シャワー(消音機能付き)、通信ケーブルなし
品番	0421BE771210
保証期間	お買い上げ日より1年間

定格・仕様	
電源	入力 AC100~240V 50/60Hz
	出力 DC5V1A
消費電力	約1W(充電時、1台あたり)
公称電圧	DC3.7V
容量	650mAh
使用環境	5℃から35℃
サイズ	直径約8.5cm×高さ約2.7cm
重量	約118g

MADE IN CHINA

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。



Li-ion

本体に使用しているリチウムイオンポリマー電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオンポリマー電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※完全に作動しなくなったことを確認すること。

※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

廃棄方法


本製品およびパッケージなどを廃棄する場合はお住まいの自治体が定める廃棄方法に従ってください。

注意

ヘッド部はシリコーンを使用しています。

以下のような状態になった場合は、使用を中止し販売店もしくは発売元に点検修理(有償)を依頼してください。

- ヘッド部が変形している。
- ヘッド部が破れている。

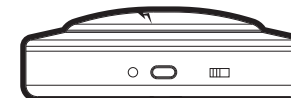

付属品および消耗品のお買い求めについて

付属品および消耗品(専用充電用USBケーブル)のお買い求めは、お買い上げの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。



健光浴シャワー
専用ACアダプター
品番:0421BE771006



健光浴シャワー
専用充電用USBケーブル
品番:0421BE771007

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後2年としております。

発売元 **ファイテン株式会社**
京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様
相談室 **0120-510-702**
午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA