




ファイテン 健光浴ヘッドスパ

保管用

取扱説明書

保証書付

品番: 0422BE783000

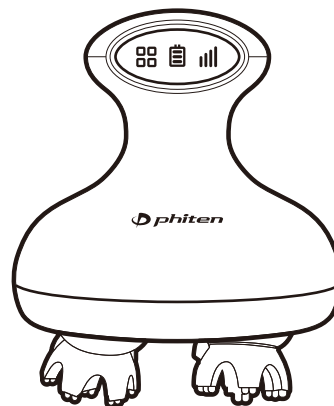

●安全上のご注意	1～5
●内容物と各部の名称	6
●充電方法	7
●アタッチメントについて	8
●ご使用の前に	9
●ご使用方法	10～11
●お手入れ方法	12
●保管の方法	13
●こんなときは	14
●定格・仕様	15
●付属品および消耗品の お買い求めについて	15
●アフターサービスについて	15
●保証書と保証規定	16

お買い上げありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、
お買い上げ店からお受け取りください。
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
 注意	人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	 「強制」を示します。 (必ずすること)

お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

警告

 禁止	●使用部位に傷など異常のある人は使用しないでください。
	●体内埋(植え)込み型および装着型の医用電気機器(ペースメーカー、心電計など)を使用している人には、使用しないでください。
	●胸部と背中上部に、又は心臓を横切るように配置した電極間に使用しないでください。
	●指定部位以外への使用はしないでください。
	●酒気を帯びた状態では使用しないでください。
	●車両の運転中に使用しないでください。
	●幼児には使用させないでください。
	●子供には使用させないでください(ただし、保護者、又は専門家などの監督下で使用する場合は除く)。機器本体で、遊ばせたり上に乗せたりしないでください。
	●本来の目的以外で使用しないでください。

●機器の使用によって、身体に異常を感じた人は、使用を中止し、医師に相談してください。

●接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人は、使用時に注意してください。

●一部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用してください。顔に使用する時は顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安に使用してください。

次の人および場合には、使用前に医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
- 疾患により発熱のある人
 - 例 1 急性炎症症状[けん(慄)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期
 - 例 2 衰弱している場合
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 血圧に異常のある人、血液疾患や血栓のある方及びその疑いのある人
- 医師から運動を禁じられている人
- 安静を必要とする人
- 妊娠中の人
- 介護を受けている人、または付き添いなしで日常生活ができない人に使用する場合
- 導電性の金属などを埋め込んだる部位に使用する人

●定期的にアタッチメントに損傷がないか点検してください。



⚠ 注意

 禁止	●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。けがや本体が故障する原因となります。
	●充電用ACアダプターおよび充電用USBケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えないでください。また重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしないでください。
	●充電用ACアダプター、充電用USBケーブルが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電やショートによる火災などの原因となります。
	●不安定な場所に置かないでください。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしないでください。けがや本体が故障する原因となります。
	●浴室内で充電は絶対にしないでください。感電やショートによる火災などの原因となります。
	●本体および付属品が、異臭、異常発熱したときは使用を中止してください。破損、発火の原因となります。
	●火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしないでください。また、火中投下、加熱、高温での充電・使用をしないでください。また、熱器具に近づけないでください。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱、発火、破裂、動作不良の原因となります。
	●分解や修理、改造はしないでください。火災、感電、けがの原因となります。
	●異常が発生した場合は、本体の電源をオフにしてください。また、充電をしているときはコンセントから充電用ACアダプターをすぐに抜いてください。けむり、異音、においがあるなど、異常状態のまま使用しないでください。
	●本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電してください。感電やショートによる火災などの原因となります。

●本製品には必ず付属の充電台、充電用ACアダプターおよび充電用USBケーブルを使用してください。付属品は他の製品には使用しないでください。

●交流100V-240Vで使用してください。充電用ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

●本体を使用しないときやお手入れするときは必ず電源をオフにしてください。充電台をお手入れするときは必ず充電用ACアダプターをコンセントから外してください。感電やショートによる火災などの原因となります。

●コンセントから充電用ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持ってください。また、濡れた手で抜き差しはしないでください。感電やショートによる火災などの原因となります。

●水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。本体が故障する原因となります。

●本体および付属品をシンナー、ベンジン、アルコール、除光液などの溶剤で拭かないでください。

次に該当する人は使用しないでください。髪の毛が絡みつき、髪を傷める原因となります。
●植毛をされている人。
●部分かつら（テープ貼りつけ、エクステーションを含む編み込みなど）を装着中の人。

●肌表面にビリビリとした痛みを感じた場合は、EMSのレベルを下げたり、部位をずらして使用してください。そのまま使用すると、頭皮や肌を傷める原因となります。肌が濡れた状態になるように随時、水などで湿らせてください。

●EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないでください。レベルは少しずつ調整してください。

●アタッチメントを強く押しつけたり、早く動かしたりしないでください。過度に1ヶ所に集中して使用しないでください。髪の毛が絡みついたときは、本体を停止させてから絡んだ毛を取り除いてください。

●使用するときは、必ずすべてのアタッチメントを取り付けてください。

●入浴剤入りのお湯や温泉では使用しないでください。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しないでください。変色、故障の原因となります。

●シャンプー、頭皮用トリートメント剤、化粧水、ジェルなどを使った場合は、必ず本体を水洗いしてください。本体の変色や変質、塗装がはがれるなどの原因となります。

●初めて使用する前に必ずお肌への事前テストを行ってから使用してください。使いはじめや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、モード1（弱）から使用してください。事故やけがをす原因となります。体に慣らしてからレベルを調整してください。

●顔に使用するときはフェイス用アタッチメントを使用してください。

●充電台は防水ではありません。水に濡れないようにご注意ください。

⚠ 注意




禁止


- アクセサリ類(ネックレスやイヤリングなど)は外してから使用してください。事故やけがの原因となります。
- 顔に使用するときは、必ずメイクを落として使用してください。メイクが崩れたり、肌トラブルの原因となります。
- 使用後は必ず本体の汚れや水分をしっかりと拭き取ってください。また、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。本体が濡れたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。
- 軽くあて、絶対に強くおしあてないでください。けがや本体が故障する原因となります。

内容物と各部の名称


<本体>

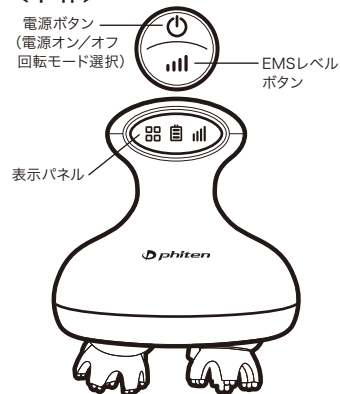

<本体(底)>

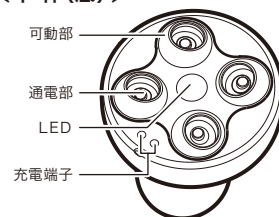

<充電台>

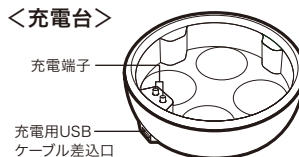


ご注意

※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。

※充電台は防水ではありません。水に濡れないようにご注意ください。


<アタッチメント(消耗品)>

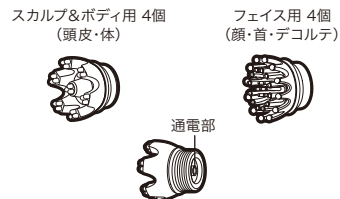

ご注意

※本体およびアタッチメント(スカルプ&ボディ用・フェイス用)の通電部は、ご使用後に毎日掃除してください。汚れていると、EMSが通電しにくくなる場合があります。

<付属品>

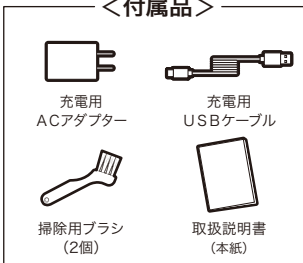

ご注意

※充電台、充電用ACアダプター、充電用USBケーブルは防水ではありません。

※水がかからない場所で保管し、濡れた状態での使用や、浴室内での充電は絶対にしないでください。

充電方法


初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をOFFにしてから充電をしてください。

- 1 充電台に充電用USBケーブルを差し込む。
- 2 充電用USBケーブルを充電用ACアダプターに差し込む。
- 3 充電用ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

充電時間の目安は約3～4時間、動作時間は約1.5時間

ご注意


※充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって異なります。

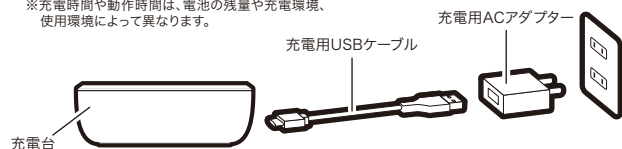

- 2 本体と充電台の充電端子がしっかりと触れるように充電台に置く。

ご注意

※必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。
充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

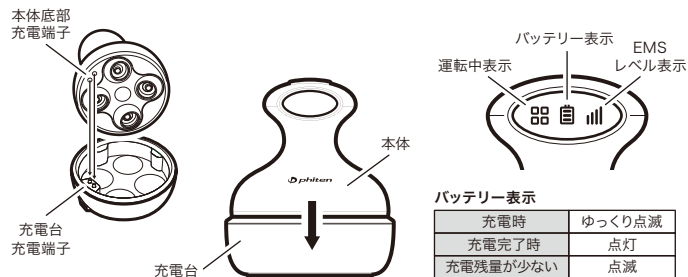

バッテリー表示	
充電時	ゆっくり点滅
充電完了時	点灯
充電残量が少ない	点滅

- 3 充電完了後、充電用ACアダプターをコンセントから抜き、本体を充電台から外す。



必ず守る

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。)
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

アタッチメントについて

用途に合わせて、スカルプ&ボディ用アタッチメントまたはフェイス用アタッチメントを付け替えてご使用ください。

- 1 アタッチメントを選んで、本体に取り付ける。

スカルプ&ボディ用
(頭皮・体)



フェイス用
(顔・首・デコルテ)



- 2 アタッチメントは確実に奥まで差し込んで取り付けてください。



ご注意

※EMSを通電させるために、アタッチメントにカーボン(炭)を配合しています。そのため、お肌や物にごすりつくと黒く汚れる場合がありますのでご注意ください。

※ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して黒っぽくなる場合がありますが異常ではありません。


万一汚れた場合は、少量の水を含ませた布などで拭き取ってください。

※白い衣服などの上からご使用になると黒い汚れが付く場合があります。

- 3 アタッチメントの+極と-極が同時に肌にあたるように、垂直に軽くおしあててください。

ご注意

※4つのアタッチメントに+極と-極が右図のように配置されています。

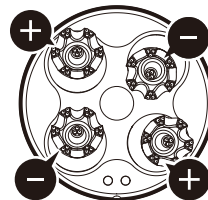

ご使用の前に

お肌への事前テスト

本製品を初めてご使用になる際は、必ず事前テストをしてください。
事前テストの際はスカルプ&ボディ用アタッチメントをご使用ください。

1 肌を清潔な状態にする。

腕の内側を石鹸で洗ってください。

2 腕の内側を水で十分に濡らし、電源ボタンをONにして約1分間使用する。

ご注意

※モード1、EMSレベル1（弱）でおこなってください。

※少しずつ位置をずらしながら、軽くあてるようにしてください。

※実施中に発疹、かゆみ、痛みなどの異常が生じた場合は直ちにテストを中止してください。

3 24時間以内にお肌に異常（痛みやほてり）がないことを確認する。

ご注意

※本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがあります。症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。

※異常がみられる場合は使用しないでください。

ご使用方法

本品の1回の稼働時間は10分です。※約10分を経過すると自動的に電源がOFFになります。

1 頭皮またはお肌を十分に濡らす。


●頭皮：水やシャンプーなど

●お肌：水やお湯、化粧水、ジェルなど

ご注意

※お肌が乾燥しているとEMSを感じにくくなります。EMSを十分に実感するには、ご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。

2 本体を図のようにしっかりと持つ。

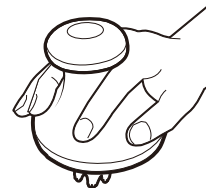

3 電源ボタンを長押ししてONにする。




4 電源ボタンを短く押すたびにモードが切り替わり、運転中表示が1回点滅する。

ご注意

※使い始めや慣れるまでは、必ずモード1から使用してください。

運転中表示

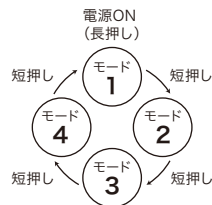



モード選択	スピード	回転	LEDライト
モード1	LOW	正回転	あり
モード2	HIGH	正回転	あり
モード3	LOW	逆回転	なし
モード4	HIGH	逆回転	なし

ご使用方法

- 5 EMSレベルボタンを押し、EMSの強さを選択する。**
使い始めは「EMSレベル1（弱）」設定です。

ご注意

※電源ON時はEMSレベル1（弱）です。
※使いはじめやお肌の弱い方、首筋に使用する場合は必ずEMSレベル1（弱）から使用してください。
※本製品は、頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じが大きく異なります。使用部位を変えることに、必ずEMSレベル1（弱）から調整するようにしてください。

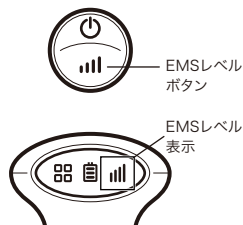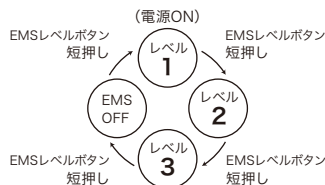

レベル選択	EMSの強さ	表示の明るさ
EMSレベル1	弱	弱
EMSレベル2	中	中
EMSレベル3	強	強

- 6 使用後は電源ボタンを長押しして電源OFFにする。**

ご注意

※電源ボタンを長押ししなくても、動作開始から約10分後に自動OFFになります。

お手入れ方法

- 1 電源がOFFになっていることを確認する。**

- 2 本体からアタッチメントを取り外す。**

ご注意

※アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

- 3 本体とアタッチメントについている髪の毛や汚れを洗い流す。**

ご注意

※図1、2のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。
※シンナー、ベンジン、アルコール、除光液などの溶剤、薬品類、熱湯は使用しないでください。



- 4 乾いた布で本体・アタッチメントの水分をふき取る。**

ご注意

※アタッチメントにカーボン（炭）を配合しているため、使用後に少量のカーボン（炭）が水に溶け出して、本体やアタッチメントが黒っぽくなる場合があります。汚れの気にならない布を使用するようにしてください。
※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因となります。

- 5 風通しの良い場所で乾かす。**

ご注意

※本体とアタッチメントは はずした状態で乾燥させてください。
※湿ったままの状態 で 長時間放置しないでください。臭いの原因になることがあります。
※アタッチメントが上向きになるように乾燥させてください。
※直射日光のあたる場所では乾燥させないでください。

- 6 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。**

保管の方法

- 1 本体の電源をOFFにする。
- 2 本体およびアタッチメントの水分を必ず拭き取り、完全に乾燥させる。

ご注意

※本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。
 ※アタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、ご使用後に少量のカーボン(炭)が水に溶け出して本体や充電台が黒っぽくなることがあります。

- 3 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから充電台に置く。

ご注意


※本体をフル充電してから保管してください。
 ※1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでくと充電ができなくなることがあります。
 ※充電台以外の場所でアタッチメントを下向きに置かないでください。アタッチメントの変形の原因になる可能性があります。

- 3 充電完了後は、充電台から充電用ACアダプターや充電用USBケーブルをコンセント等から抜いて保管してください。

ご注意

※火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
 ※子供の手の届かない場所に保管してください。

こんなときは

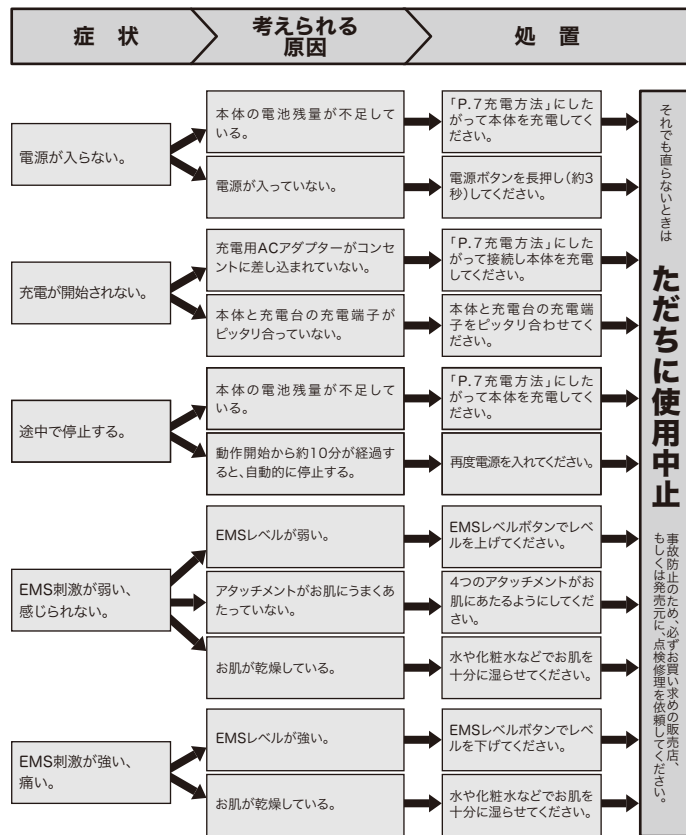

ご注意

※個人差や使用部位により、刺激が強く感じられる場合があります。無理のない範囲でレベルを調整してご使用ください。

定格・仕様

品名	ファイテン 健光浴ヘッドスパ	品番	0422BE783000
電源	入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC5V 1A	消費電力	約5W
サイズ	高12.3cm×幅10.5cm×奥行10.5cm (充電台除く)	重量	約492g (電源コード含む)
使用環境	温度5℃~40℃	素材	ABS樹脂、シリコン、カーボン
		保証期間	お買い上げ日より1年間

製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

本製品の使用電池	
名称	リチウムイオン電池
公称電圧	DC3.7V 1200mAh
数量	1本



Li-ion

この製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解してリチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

ご注意

※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。

※完全に作動しなくなったことを確認すること。

付属品および消耗品のお買い求めについて

付属品および消耗品 (充電用ACアダプター、充電用USBケーブル、各アタッチメント) のお求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



ファイテン 健光浴ヘッドスパ 充電用ACアダプター
品番:0422BE783001



ファイテン 健光浴ヘッドスパ 充電用USBケーブル
品番:0422BE783002



ファイテン 健光浴ヘッドスパ
交換用アタッチメント(スカルプ&ボディ)
品番:0422BE783003



ファイテン 健光浴ヘッドスパ
交換用アタッチメント(フェイス)
品番:0422BE783004

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品 (商品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後2年としております。

ファイテン株式会社
発売元 京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地
URL <https://www.phiten.com/>

お客様 ☎0120-510-702
相談室 午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴ヘッドスパをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。
※本製品の保証は、日本国内でのご使用に限ります。

This warranty is valid only in Japan

品番	0422BE783000	保証期間	お買い上げ日より1年間
販売店 お買い上げ年月日		販売店名 住所 電話番号	

※販売店様へ: この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。

必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒	
	お名前	フリガナ	お電話番号

お客様相談室	☎0120-510-702 午前10時~午後5時(土・日・祝日を除く)	製造番号	
--------	--	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体と充電台のみが保証対象となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品 (充電用ACアダプター、充電用USBケーブル、各アタッチメント)。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

MEMO

MEMO