

## 保証書

このたびは、ファイテン 健光浴電動歯ブラシをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一  
不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。  
※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。  
This warranty is valid only in Japan

|        |                     |              |      |             |
|--------|---------------------|--------------|------|-------------|
| 販売店記入欄 | 品番                  | 0423BE789000 | 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
|        | お買い上げ年月日※           |              |      |             |
|        | 販売店名※<br>住所<br>電話番号 |              |      |             |

※販売店様へ: この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。  
必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

|        |     |           |       |  |
|--------|-----|-----------|-------|--|
| お客様記入欄 | ご住所 | フリガナ<br>〒 |       |  |
|        | お名前 | フリガナ      | お電話番号 |  |

|        |                                        |      |  |
|--------|----------------------------------------|------|--|
| お客様相談室 | ☎0120-510-702<br>午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く) | 製造番号 |  |
|--------|----------------------------------------|------|--|

## 保証規定

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体、充電台、専用ACアダプターが保証対象となります。  
※ブラシ、専用ケース、充電台のケーブル断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店、もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。  
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
  - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
  - 本書の提示が無い場合。
  - 本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 消耗部品(充電電池、ブラシ、モーター)。
  - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

**phiten**


ファイテン  
健光浴電動歯ブラシ

## 保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0423BE789000

- 安全上のご注意 1～2
- 内容物と各部の名称 3
- 充電方法 4
- ブラシの着脱方法 5
- 電源・モード選択  
ボタン操作方法 5
- ご使用方法 6～7
- お手入れ方法 8
- 保管の方法 8
- こんなときは 9
- 定格・仕様 10
- 付属品および消耗品の  
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

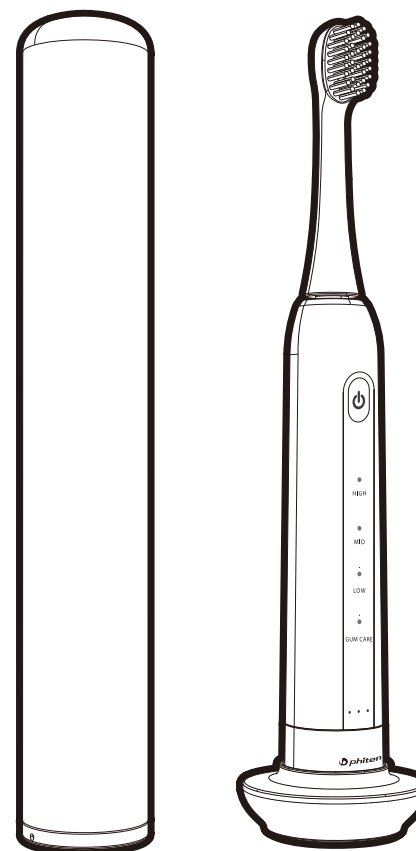

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、  
お買い上げ店からお受け取りください。  
本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

## 安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
※ここに示した注意事項は本製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

|                                                                                             |                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。    |  「禁止」を示します。<br>(してはいけないこと) |
|  <b>注意</b> | 人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。 |  「強制」を示します。<br>(必ずすること)    |


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

|  <b>警告</b>   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b>   | ●本体に異常を感じた場合は、直ちに電源を切り使用を中止して販売店または発売元に連絡してください。                            |
|                                                                                               | ●本来の目的以外には使用しないでください。                                                       |
|                                                                                               | ●感電の原因となりますので他の電気製品(美容器など)と同時に使用しないでください。                                   |
|                                                                                               | ●感電および異常動作により、身体に重大な被害を与える原因となりますので本体、充電台、専用ACアダプターの修理、分解、改造は行わないでください。     |
|                                                                                               | ●火災、感電、故障の原因となりますので本体、充電台、専用ACアダプター内部に異物を入れないでください。                         |
|  <b>注意</b> |                                                                             |
|  <b>禁止</b> | ●長期間で使用にならない場合は、必ずコンセントプラグを抜いてください。                                         |
|                                                                                               | ●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる・歯茎など口腔内に異常を感じる、かゆみ、発赤、蕁麻疹など)を感じたら直ちに使用を中止してください。      |
|                                                                                               | ●歯茎から出血する場合は使用しないでください。そのままご使用を続けると、症状を悪化させることがあります。出血が続く場合は、歯科医にご相談してください。 |
|                                                                                               | ●破損した本製品は使用しないでください。                                                        |

|                                                                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  <b>禁止</b>     | ●お手入れをするときはシンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、油分、熱湯などは使用しないでください。 |
|                                                                                                   | ●本体、充電台、専用ACアダプターの上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えたりしないでください。     |
|                                                                                                   | ●充電台や専用ACアダプターは濡らさないでください。                                    |
|                                                                                                   | ●充電台や専用ACアダプターに、オイル(油分の多い化粧品類も含む)などを付着させないでください。              |
|                                                                                                   | ●USBプラグやコンセントプラグにほこりが付着しないように定期的に乾いた布などでお手入れをしてください。          |
|                                                                                                   | ●感電や故障の原因となりますので充電は浴室など湿度の高いところでは決して行わないでください。                |
|                                                                                                   | ●充電台が熱くなり火傷や火災の原因となりますので充電台にコインやクリップなど金属製の物を入れないでください。        |
|                                                                                                   | ●充電台のケーブルやUSBプラグを傷つける、加工する、極端に折り曲げる、引っばる、ねじる、挟み込むなどしないでください。  |
|                                                                                                   | ●必ず交流100Vでご使用ください。                                            |
|                                                                                                   | ●専用ACアダプターが破損していたり、コンセントへの差し込みが緩かったりするときは、使用しないでください。         |
|  <b>必ず守る</b> | ●コンセントプラグは根元までしっかり奥まで差し込んでください。                               |
|                                                                                                   | ●ケーブル断線の原因となりますので、USBプラグやコンセントプラグを抜くときは、ケーブルを持って抜かないでください。    |
|  <b>必ず守る</b> | ●本製品は、防水仕様(IPX6)ですが、お湯(浴槽の中など)に浸けっぱなしにしないでください。               |

## 内容物と各部の名称

＜本 体＞

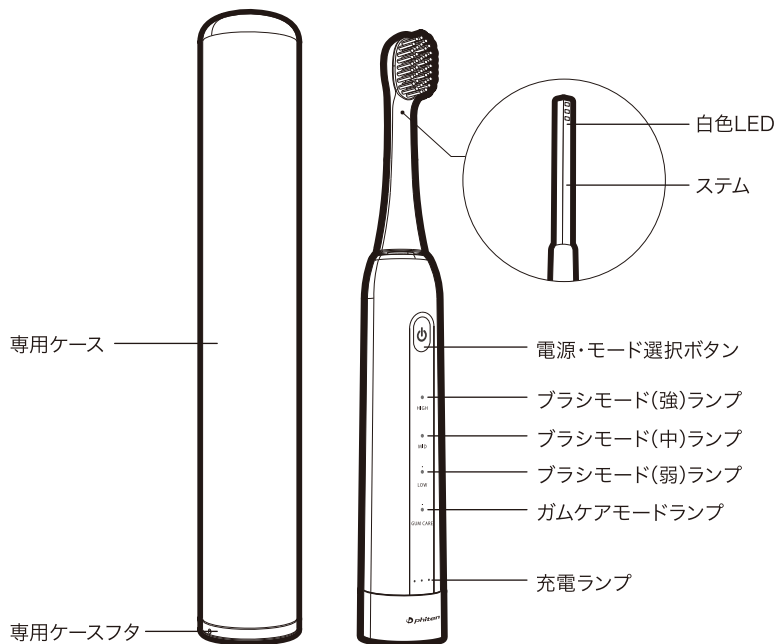

＜付属品＞




## 充電方法


**1** 充電台のUSBプラグを  
専用ACアダプターのUSB端子に差し込んでください。

充電台のUSBプラグと専用ACアダプターのUSB端子の形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。

※右図のすきまは、正常な状態です。  
破損や故障の原因となりますので  
無理に押し込まないでください。

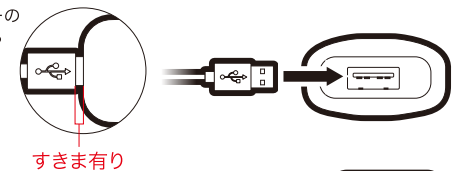


**2** 専用ACアダプターを  
コンセントに差し込んでください。

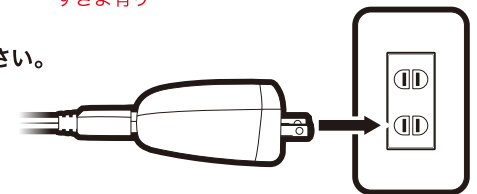

**3** 充電台に本体をセットしてください。

充電ランプが順に点滅して充電が始まります。  
充電が完了したら、充電ランプは点灯になります。  
しばらくすると充電ランプは消灯します。  
約10時間で充電が完了します。

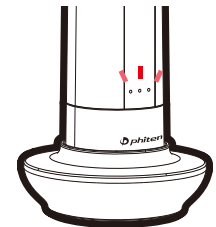

※充電ランプが点滅しない場合は  
充電台に本体が正しくセットされていない  
可能性がありますので充電台に本体を  
正しくセットしてください。

電池残量の目安

充電切れ 点滅 消灯 消灯

充電してください 点灯 消灯 消灯

少し減っている 点灯 点灯 消灯

満充電 点灯 点灯 点灯

充電切れ: 充電ランプが赤く点滅して充電を知らせ、本体は3秒で自動OFFになります。

**4** 充電が完了したら専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。

※内蔵バッテリーは消耗品です。  
充放電の繰り返し、ご使用環境によりご使用回数に変化がでます。




●専用ACアダプターの着脱時に、ケーブル部分を持って引っ張るとケーブル被膜が剥がれて、ショートや感電の原因となりますので、プラグ部分を持って確実に行ってください。

## ブラシの着脱方法


### 取り付け方

ブラシを矢印の方向に  
ゆっくりとしっかり  
差し込んでください。

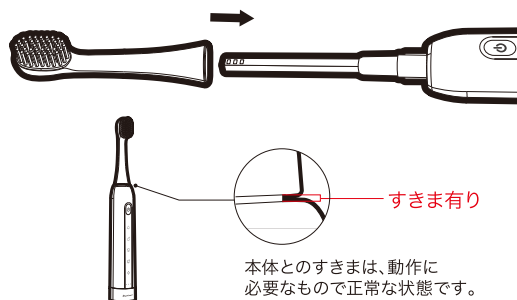

### 取り外し方

ブラシを矢印の方向に  
まっすぐ引っ張って  
取り外してください。

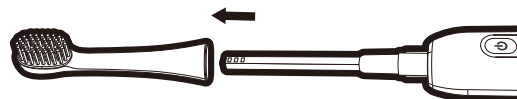

## 電源・モード選択ボタン操作方法


- 1 電源・モード選択ボタンを  
長押しして、電源をONにします。

- 2 電源・モード選択ボタンを  
短押しして、ご希望の  
モードにします。  
モードは4種類あり、  
電源・モード選択ボタンを押すたびに、  
HIGH(強)→MID(中)→LOW(弱)  
→GUM CARE(ガムケア)と  
切り替わります。

※設定を記憶しているため、  
電源を入れたと前回ご使用していた  
モードから開始されます。

#### ご注意

※初めてブラシモードをご使用になる  
場合、LOW(弱)からお試しいただく  
ことをおすすめします。

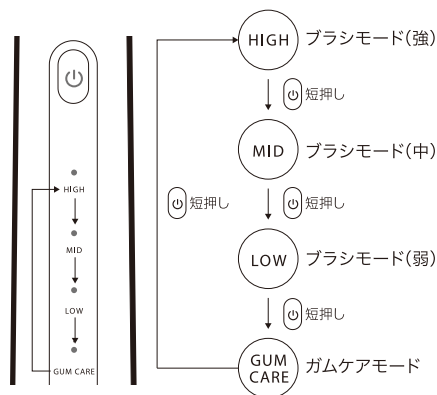

- 3 途中で停止させるには、電源・モード選択ボタンを  
長押しして、電源をOFFにしてください。

## ご使用方法

### 歯を磨くとき

歯ブラシ + ブラシモード


ブラシモードの1回の稼動時間は約2分です。

※ブラシモードは約2分を経過すると自動的に電源がOFFになります。

- 1 歯ブラシを取り付け、ブラシに水または  
歯磨き剤を軽く塗布してください。

#### ご注意

※ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。  
異常が発見された場合はそのまま使用しないでください。  
お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。

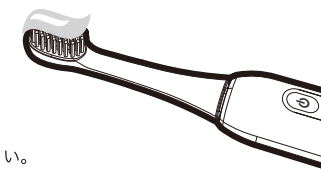


- 2 お口の中にブラシを入れてから  
電源・モード選択ボタンを長押しして  
ご使用ください。

白色LED、充電ランプ、現在のモードランプが点灯します。

※設定を記憶しているため、電源を入れたと前回ご使用  
していたモードから開始されます。

#### ご注意

※作動中は、ブラシを取り外さないでください。  
※歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、必ずお口の中にブラシを  
入れてから電源を入れてください。

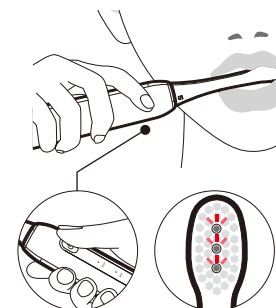

- 3 ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度に当て  
ゆっくり動かしてください。

※途中で振動を停止させるには電源・モード選択ボタンを  
長押しして、電源をOFFにしてください。




- 4 ご使用後は、ブラシを取り外してから  
付着した汚れを水で洗い流し、よく乾かしてください。

※ブラシの根元の汚れもよく洗い流してください。

#### ご注意

※故障の原因となりますので、ステムと本体の接続部に  
必要以上に力を加えないでください。

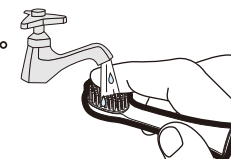

禁止

- 故障の原因となりますので短時間のあいだに電源・モード選択ボタンのON、OFFを連続  
して繰り返さないでください。
- 本製品は、防水仕様(IPX6)ですが、お湯(浴槽の中など)に浸けっぱなしにしないでくだ  
さい。

## ご使用方法

### 歯茎のケアをしたいとき

シリコンブラシ

+

ガムケアモード

ガムケアモードの1回の稼働時間は約1分です。

※ガムケアモードは約1分を経過すると自動的に電源がOFFになります。

#### 1 シリコンブラシを取り付け ブラシを水で湿らせてください。

##### ご注意

※ご使用前に本体に損傷がないか確認してください。  
異常が発見された場合はそのまま使用しないでください。  
お買い上げの販売店もしくは発売元に相談してください。

#### 2 お口の中にブラシを入れてから 電源・モード選択ボタンを長押しして 電源をONにします。 ガムケアモードを選択してご使用ください。

白色LED、充電ランプ、現在のモードランプが点灯します。

※設定を記憶しているため、電源を入れると前回ご使用していたモードから開始されます。

##### ご注意

※作動中は、ブラシを取り外さないでください。

#### 3 シリコンブラシを歯茎に軽く押し当て 動かしてください。

※途中で振動を停止させるには電源・モード選択ボタンを長押しして、電源をOFFにしてください。

#### 4 ご使用後は、ブラシを取り外してから 付着した汚れを水で洗い流し、よく乾かしてください。

※ブラシの根元の汚れもよく洗い流してください。

##### ご注意

※故障の原因となりますので、ステムと本体の接続部に必要以上に力を加えないでください。



- 故障の原因となりますので短時間のあいだに電源・モード選択ボタンのON、OFFを連続して繰り返さないでください。
- 本製品は、防水仕様(IPX6)ですが、お湯(浴槽の中など)に浸けっぱなしにしないでください。

## お手入れ方法

清潔な状態を保つため、ご使用のたびにお手入れをおすすめします。  
電源がOFFになっていることを確認してからお手入れしてください。


### ブラシ・ステム

※ご使用のたびに行ってください。



- シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。


#### 1 本体からブラシを矢印の方向に まっすぐ引っ張って取り外してください。

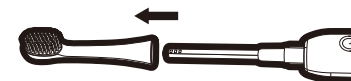

#### 2 外したブラシを水洗いしてください。 お手入れ後はよく乾かしてください。

##### ご注意


※根元の汚れもよく洗い流してください。  
※毛先を強く引っ張ったり、無理に広げたりしないでください。  
※シリコンブラシは尖ったもので無理に洗わないでください。

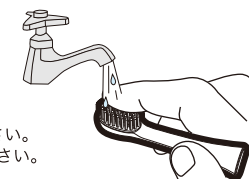

#### 3 ステムについた汚れは、水洗いしてください。 お手入れ後は水分をよく拭き取ってください。

##### ご注意

※急な流水で水洗いしないでください。  
※水の中に放置しないでください。  
※破損の原因となりますので、お湯は使用しないでください。

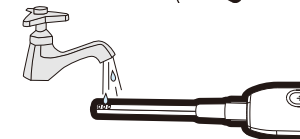

### 本体・充電台

※汚れがついたときに行ってください。

充電台・本体についた汚れは、水または薄めた中性洗剤などを  
含ませ固くしぼった布などできれいに拭き取ってください。

##### ご注意

※充電台は防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。



## 保管の方法


- 保管の際は、汚れやホコリをよく拭き取り、風呂場などの水場、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 長期間保管される場合は、汚れやホコリが付着しないよう、専用ケースに入れて保管してください。



事故、怪我、故障の原因となりますので次のような場所でのご使用および保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

## こんなときは

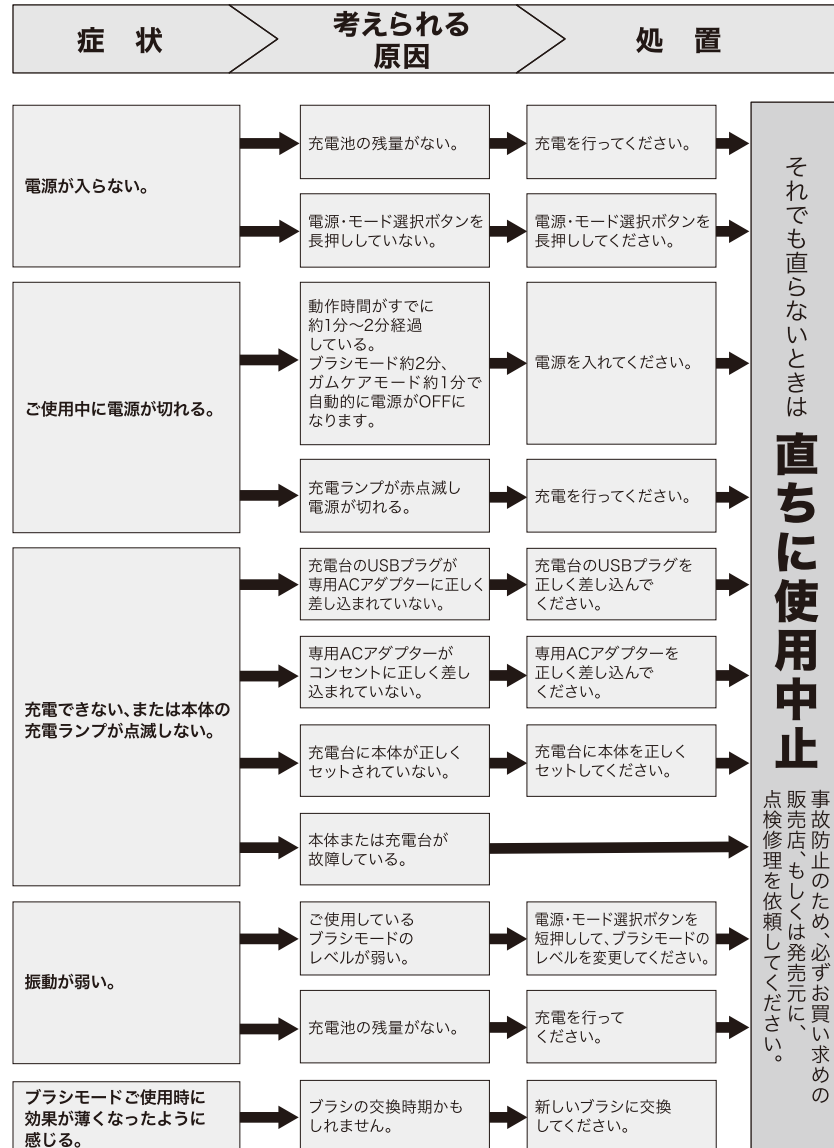

## 定格・仕様

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 品 名        | ファイテン 健光浴電動歯ブラシ                        |
| 品 番        | 0423BE789000                           |
| 電 源        | 入力:AC100～240V 50/60Hz 0.3A<br>出力:5V 1A |
| 消 費 電 力    | 約1W                                    |
| サイズ(充電台除く) | 高25cm×幅3.3cm×奥行3.1cm                   |
| 重 量(充電台除く) | 約131g                                  |
| 使 用 環 境    | 温度5℃～40℃                               |
| 素 材        | ABS樹脂、シリコン、スチール                        |
| 保 証 期 間    | お買い上げ日より1年間                            |

本製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

| 本製品の使用電池 |           |
|----------|-----------|
| 名 称      | リチウムイオン電池 |
| 公 称 電 圧  | DC3.7V    |
| 数 量      | 1本        |
| 容 量      | 750mAh    |



Li-ion

この本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。分解して、リチウムイオン電池を取り外すことはできませんので、自治体の処分方法に従ってください。

**ご注意**

※本製品を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させること。  
※完全に作動しなくなったことを確認すること。

## 付属品および消耗品のお買い求めについて


付属品および消耗品(ブラシ)のお求めは、お買い上げの販売店、もしくは発売元へお問い合わせください。



健光浴電動歯ブラシ  
替えブラシ  
品番:0423BE789001



健光浴電動歯ブラシ  
充電台  
品番:0423BE789002

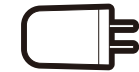

健光浴電動歯ブラシ  
専用ACアダプター  
品番:0423BE789003

## アフターサービスについて

### 補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年としております。

ファイテン株式会社  
発売元 京都市中京区烏丸通錦小路角  
手洗水町678番地  
URL <https://www.phiten.com/>

お客様 0120-510-702  
相談室 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA