

保証書

このたびは、ファイテン 健光浴ドーム (簡単取付タイプ) をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生した場合、保証規定によりお買い上げ日より1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でのご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan

販売店記入欄	品番	0423BE791300	保証期間	お買い上げ日より1年間
	お買い上げ年月日※			
	販売店名※			
	住所※			
	電話番号※			

※販売店様へ: この保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。

必ずお買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様へお渡しください。

お客様記入欄	ご住所	フリガナ 〒		
	お名前	フリガナ	お電話番号	

お客様相談室	☎0120-510-702 午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)	製造番号	
--------	--	------	--

保証規定

- 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 本体、専用ACアダプターが保証対象となります。
※専用ACアダプターの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお買い求めの販売店もしくは発売元にご依頼ください。修理費、送料共に無償で対応いたします。
なお保証期間を過ぎたものについての修理費、送料はお客様のご負担でお願いいたします。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書に記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品(遮光ゴーグル)。
 - 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間や条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては有償といたします。
- 保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービスや安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。



ファイテン 健光浴ドーム
(簡単取付タイプ)

保管用 取扱説明書

保証書付

品番: 0423BE791200

品番: 0423BE791300



- 安全上のご注意 1～3
- 内容物と各部の名称 4
- 本体の組み立て方法 5
- 専用ACアダプターの接続方法 6
- ご使用方法 7
- お手入れ方法 8
- 保管方法 8
- こんなときは 9
- 定格・仕様 10
- 廃棄方法 10
- 付属品および消耗品の
お買い求めについて 10
- アフターサービスについて 10
- 保証書と保証規定 11

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書は「お買い上げ年月日、販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、

お買い上げ店からお受け取りください。

本製品を他の人に貸与や譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ここに示した注意事項は本製品を安全に正しくお使い頂き、ご使用者への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	 「禁止」を示します。 (してはいけないこと)
 注意	人への障害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	 「強制」を示します。 (必ずすること)

※お読みになった後は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。


 警告	
 禁止	●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方にご使用させないでください。
	●事故の原因となりますので、乳幼児や小さなお子様に使わせたり、本製品で遊ばせたりしないでください。
	●火災や感電の原因となりますので専用ACアダプターのコードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねたりして使用しないでください。また、コードに重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。
	●火災、感電、故障の原因となりますのでAC100V以外の電源では使用しないでください。
	●火災、感電、故障の原因となりますので本体や専用ACアダプター内部に異物を入れないでください。
	●火災や火傷の原因となりますので本体や専用ACアダプターを修理、分解、改造しないでください。
	●本製品は防水ではありません。漏電によって、感電や発火の原因となりますので風呂場など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
	●火災、感電、故障の原因となりますので水をかけたり、水に浸けたりしないでください。
	●感電や故障の原因となりますので濡れた手で本体や専用ACアダプターに触れないでください。

 禁止	●タコ足配線はしないでください。
	●専用ACアダプターの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
 強制	●指定部位以外、口内、手術をした部位に使用しないでください。
	●次のような方には使用しないでください。 ・妊娠中の方や生理中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因) ・傷、湿疹、はれもの、過度の日焼けなど皮膚に異常がある方 ・体調のすぐれない方 ・お酒を飲まれている方 ・疲労の激しい方 ・顔面黒皮症の方 ・光過敏症の方 ・光の点滅に反応するてんかん発作のある方 ・心臓疾患の方 ・顔面神経痛の方 ・目に異常のある方 ・ステロイド系ホルモンや肝機能障害で毛細血管拡張のある方
	●事故や体調不良を起こす原因となりますのでご使用中にめまい、吐き気、痛み、お肌のカブレなど、体に異常があらわれたり感じたりした場合は、直ちに使用を中止してください。不快感が続く場合は、医師に相談してください。
	●本製品をご使用する前に体調を確認し正しくお使いください。
	●火災や火傷の原因となりますので本体や専用ACアダプターに異音や異常が発生したら、直ちにご使用を中止し、必ず修理を依頼してください。
	●本体動作に異常を発見した場合は、直ちに点検、修理を依頼してください。
	●LED照射時は、付属の遮光ゴーグルを装着し、必ず目を閉じてください。
	●使い始めの方や敏感なお肌の方は、ご使用時間を短めにしてお肌の様子を見ながらご使用してください。
	●眼鏡やコンタクトは外してご使用してください。
	●イヤリングやネックレスなどの貴金属類は外してご使用してください。
	●次のような方は必ず医師と相談のうえご使用してください。 ・薬を服用中の方や疲労の激しい方
	●目、お肌、体の痛み、異常を感じたらすぐにご使用を中止し、医師に相談してください。
	●ひげ剃りや脱毛処理した部位には、時間をおいてからご使用してください。
	●必ず付属の専用ACアダプターをご使用してください。
	●専用ACアダプターのホコリは定期的に取り除いてください。


 強制	●お手入れの際は、運転を停止して、必ず専用ACアダプターを抜いてください。
	●専用ACアダプターを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
	●長期間使用しない場合は、専用ACアダプターを抜いてください。
⚠ 注意	
 禁止	●故障の原因となりますので本製品の上に物を載せないでください。
	●LED照射時、LED照射ランプを直視しないでください。
	●本体の排気口をふさがないでください。
	●事故や故障の原因となりますので本来の目的や用途以外には使用しないでください。
	●痛みや体調不良を感じたときは、使用しないでください。
	●健康が特にすぐれない方、飲酒をしている方、疲労の激しい方は使用しないでください。
	●怪我、破損、故障の原因となりますので本体を針やハサミなど尖った物で押しったり、突いたりしないでください。
	●破損した本製品は使用しないでください。
 強制	●家庭用コンセント以外の電源は使用しないでください。
	●お手入れをする際はシンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。
	●コンセントプラグは根元までしっかり差し込んでください。
	●落雷が発生すると、過電流や過電圧で故障する場合がありますので、ご注意ください。
 強制	●水平で安定した場所でご使用してください。

内容物と各部の名称

<本 体>

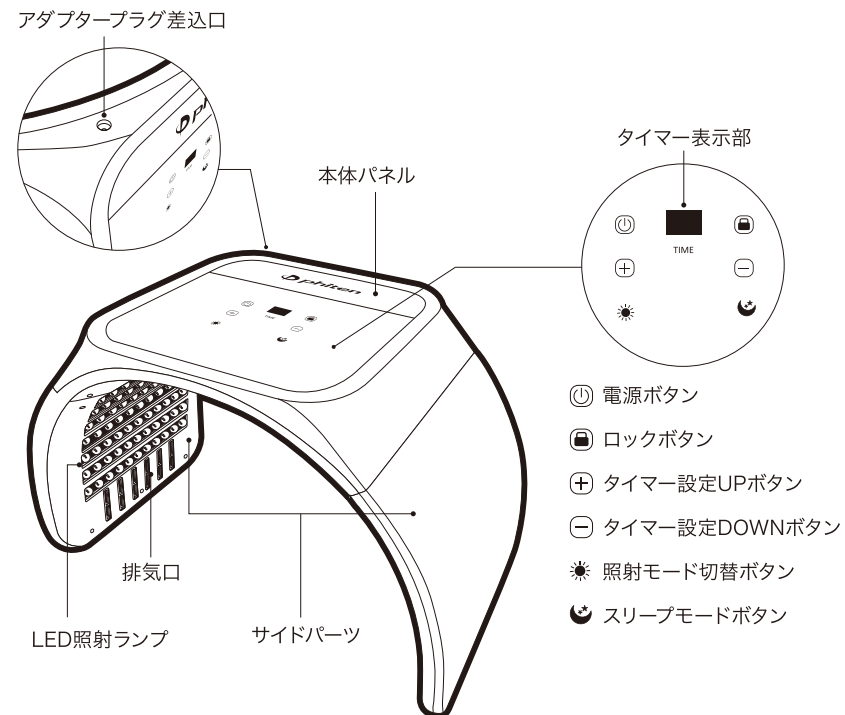

<付属品>

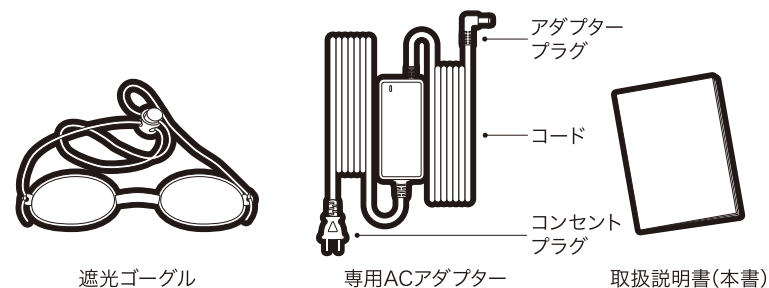


本体の組み立て方法

1 本体パネルにサイドパーツをスライドして連結してください。

本体パネルとサイドパーツの形状を確認し、形状が一致するように差し込んでください。

ご注意


※無理に押し込まないでください。

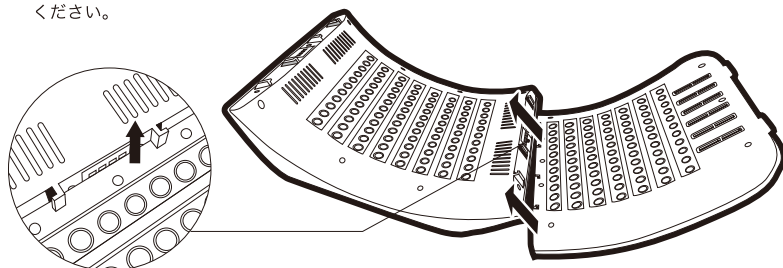

2 反対側のサイドパーツも同じ要領で本体パネルと連結してください。

ご注意

※組立後の本製品を持つ場合は、サイドパーツではなく本体パネル部分の縁を持ってください。サイドパーツを持って持ち上げると接続部位の爪が破損する場合があります。またLED照射ランプ部分は持たないでください。

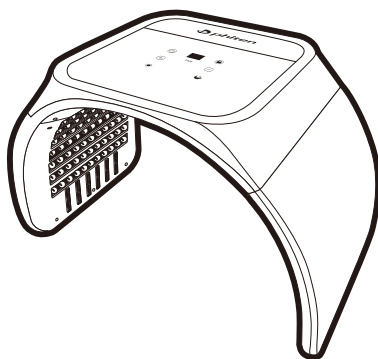


禁止

●故障の原因となりますので、本製品の上に物を置いたり、物を被せたりしないでください。

専用ACアダプターの接続方法


1 本体のアダプタープラグ差込口に専用ACアダプターのアダプタープラグを差し込んでください。

アダプタープラグ差込口

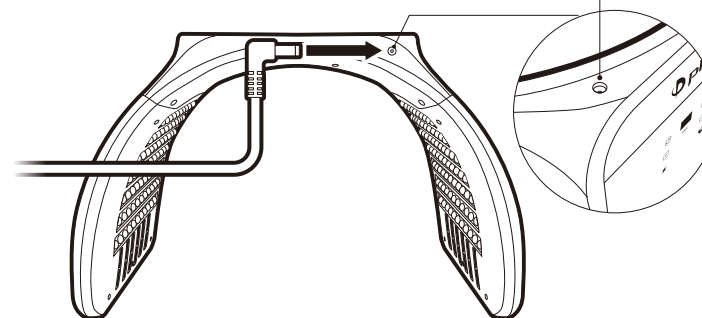

2 専用ACアダプターのコンセントプラグをコンセントに差し込んでください。

ピーと音が鳴り、本体の電源ボタンがゆっくり赤点滅しスタンバイモードになります。

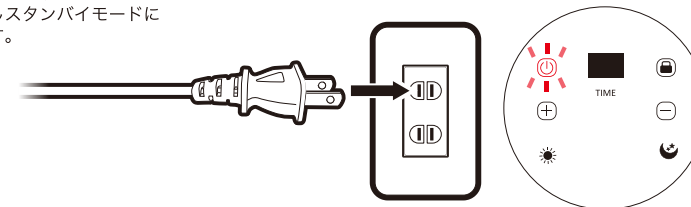

強制

●専用ACアダプターの着脱時に、コード部分を持って引っ張るとコード被膜が剥がれて、ショートや感電の原因となりますのでプラグ部分を持って確実に行ってください。


ご使用方法

本製品の1回の稼働時間は通常照射モード、ローテーションモードは約10分、30分、60分です。スリープモードは約1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間です。

※設定した時間を経過すると、自動的に電源がOFFになります。


1 電源ボタンをタッチしてください。

ピと音が鳴り、本体のLED照射ランプと本体パネルの全ボタンが赤点灯し、タイマー表示部に10が表示され通常照射モード(赤)が始まります。

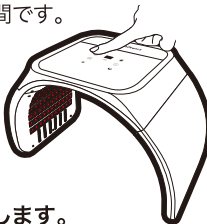

2 必要に応じて本体パネルを操作して、ご希望のモードにします。

照射モード切替ボタンをタッチするたびに、(通常照射モード赤→白→緑→黄→青)→ローテーションモードと切り替わります。スリープモードボタンをタッチするとスリープモードに切り替わります。

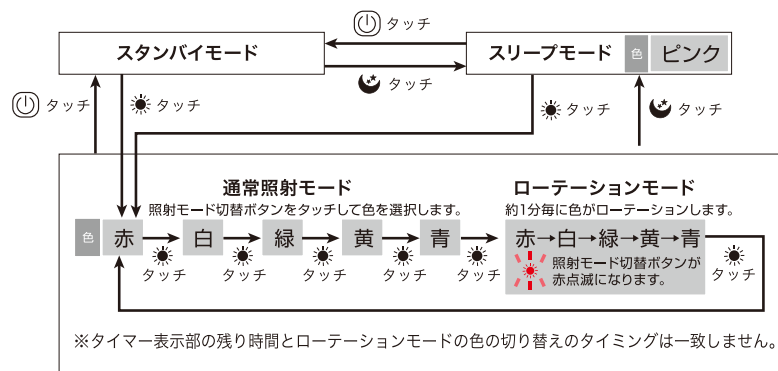

タイマー設定UPボタンをタッチすると時間が増えます。タイマー設定DOWNボタンをタッチすると時間が減ります。

稼働時間を増やしたいとき
(+) タイマー設定UPボタン

通常照射モード、ローテーションモード
10分 30分 60分

稼働時間を減らしたいとき
(-) タイマー設定DOWNボタン

スリープモード
1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間

ロックボタンをタッチすると、ロックボタンがより赤く点灯し、本体の操作(電源ボタン、タイマー設定UPボタン、タイマー設定DOWNボタン、照射モード切替ボタン、スリープモードボタン)をロックすることができます。もう一度ロックボタンをタッチするとロックを解除できます。

(ロック) ロックボタン

(解除) ロック解除

(点滅) ロック




●故障の原因となりますので、短時間に電源ボタンのON、OFFを繰り返さないでください。

3 遮光ゴーグルを装着し、本製品に顔を入れてご使用してください。

※設定した時間を経過すると、自動的に電源がOFFになります。
※途中で停止させるには電源ボタンをタッチし、スタンバイモードにしてください。

ご注意

※必ず、遮光ゴーグルを付けてください。
※暖房器具(発熱器具)の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、車内など高温になる場所では使用しないでください。
※通常照射モード(白)での60分を超える連続稼働は控えください。

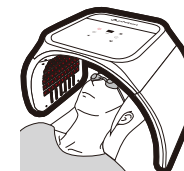

4 ご使用後は必ずコンセントプラグを抜いてください。

お手入れ方法


本製品を清潔に保つため、定期的にお手入れを行ってください。
専用ACアダプターをコンセントから抜いた状態でお手入れしてください。

本体・遮光ゴーグル



●シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨粉、熱湯などは使用しないでください。

- 本体や遮光ゴーグルについた汚れは、ティッシュや乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、水または薄めた中性洗剤で湿らせ固く絞った布で拭き取ってください。その後、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

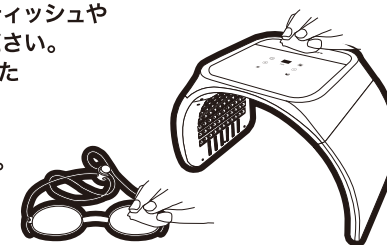

保管方法


- ご使用後は、汚れやホコリを拭き取り、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。



事故、怪我、故障の原因となりますので、次のような場所での保管はおやめください。

- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所。
- 暖房器具(発熱器具)の近くやホットカーペットの上など高温になる場所。
- 直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所。
- 水のかかる場所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所。
- 振動や衝撃の加わりやすい場所。

こんなときは

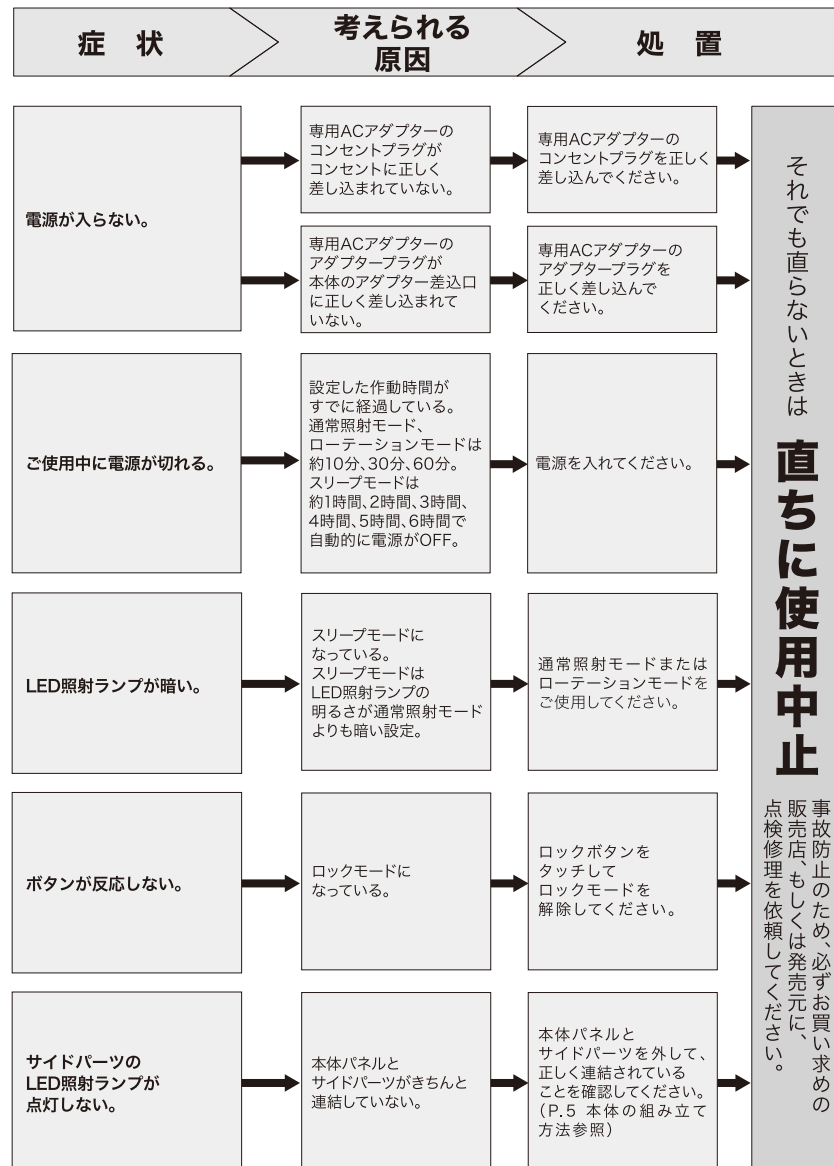

定格・仕様


品 名	ファイテン 健光浴ドーム (簡単取付タイプ)
品 番	0423BE791200 0423BE791300
入 力	AC100～240V 50/60Hz
出 力	12V 5.0A
消 費 電 力	約60W
サ イ ズ	約幅49 cm×高30cm×奥行25cm
重 量	約1.5kg
使 用 環 境	-5℃～40℃
素 材	ABS樹脂、ステンレス
保 証 期 間	お買い上げ日より1年間

廃棄方法

本製品およびパッケージなどを廃棄する場合はお住まいの自治体が定める廃棄方法に従ってください。

付属品および消耗品のお買い求めについて

付属品(専用ACアダプター)および消耗品(遮光ゴーグル)のお求めは、お買い上げの販売店もしくは発売元へお問い合わせください。

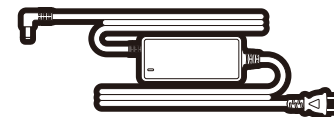

ファイテン 健光浴ドーム 専用ACアダプター
品番:0423BE791201



ファイテン 健光浴ドーム 遮光ゴーグル
品番:0423BE791002

アフターサービスについて

補修用性能部品の保有期間

当社では、本製品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後3年としております。

ファイテン株式会社
発売元 京都市中京区烏丸通錦小路角
手洗水町678番地

URL <https://www.phiten.com/>

お客様
相談室 ☎0120-510-702
午前10時～午後5時(土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA